

PAX



Das neue PAX-Clip-In System /
The new PAX-Clip-In system



PAX-Clip-In System (PCI) / PAX-Clip-In system (PCI)

PAX-Clip-In System
PAX-Clip-In system




PAX-Ampullenclip – Das kleine Klemmwunder!

Jeder Clip lässt sich einzeln auf der PAX-Clipschiene positionieren und auch einzeln wieder entfernen. Der Clip sitzt fest in seiner Position und ermöglicht ein einfaches, schnelles und sicheres Entnehmen der Ampulle.

PAX-ampoule-clip – The little clip miracle!

Each clip can be individually positioned onto the PAX-clip-rail and can also be removed individually. The clip is tightly fixed into its position and thus removing an ampoule is simple, quick and safe.

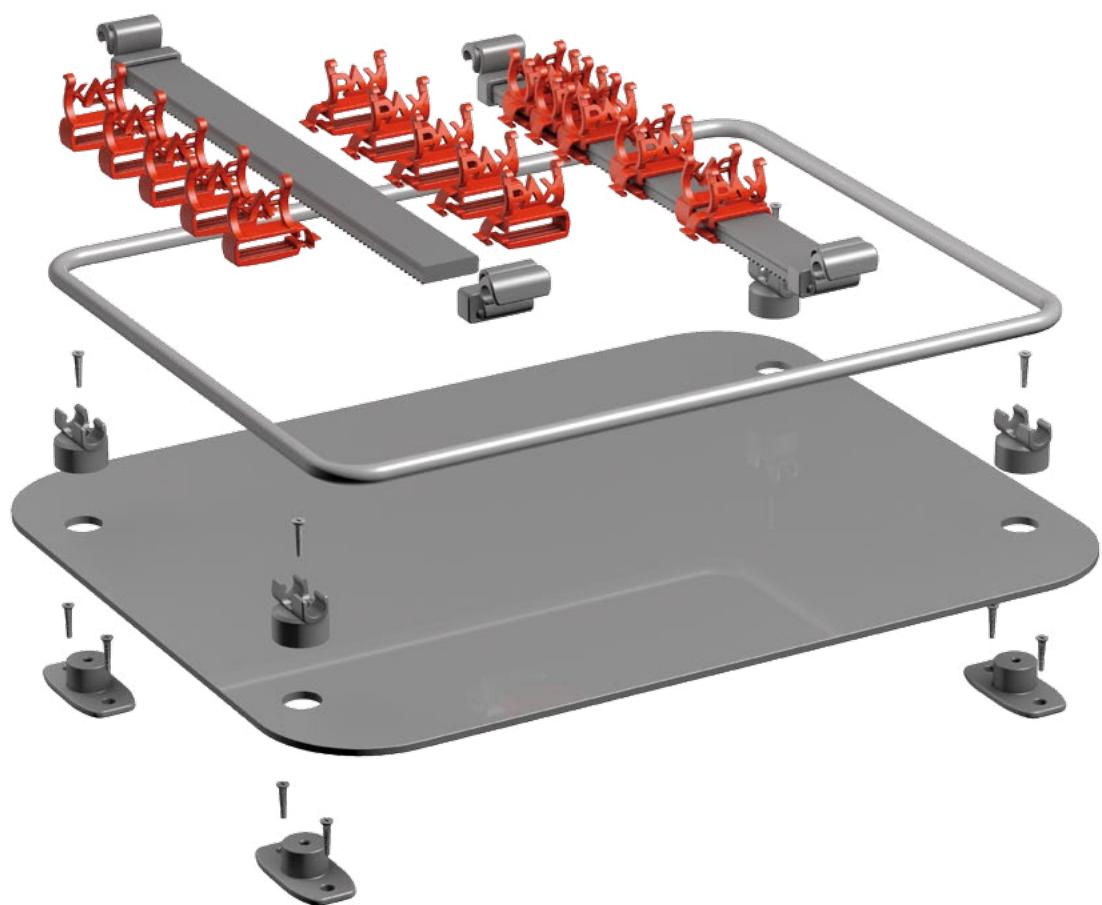



Der PAX-Ampullenclip ist ein kleines Klemmwunder. Mit nur einem Clip und diesem in doppelter Ausführung lassen sich Ampullen unterschiedlicher Größe problemlos auf der PAX-Clipschiene befestigen. Je nach Abstand der beiden Clips (eines Clippaares) können Brechampullen mit dem Inhalt 1 - 2 ml, 5ml, 10 ml und 20 ml, so wie Stechampullen mit einem Durchmesser von bis zu 22 mm untergebracht werden. Bei größeren Durchmessern bis zu 30 mm wird ein zusätzliches Gummiband benötigt. (Siehe Bedienungsanleitung) Bei geschickter Kombination können z. B. die Aqua dest. Plastikampullen direkt neben der Trockensubstanz gelagert werden. Die Clips können platzsparend direkt nebeneinander und völlig unabhängig von der Ampullengröße angeordnet werden. Die PAX-Clipschiene wird dann jeweils nach Bedarf auf dem PAX-Clipschienenrahmen positioniert.

The PAX-ampoule-clip is a little clip miracle. By only one double clip ampoules of different sizes can be fixed to the PAX-clip-rail without any problems. Depending on the distance between both clip-couples ampoules with a content of 1 - 2ml, 5ml, 10ml and 20ml as well as prick ampoules with a diameter of up to 22mm can be stored. For diameters up to 30 mm a rubber band is required. (See manual) By a clever combination e.g. the aqua dest. plastic ampoules can be stored directly next to the dry substances. The clips can be arranged directly next to each other in a space saving manner completely independent from the ampoule size. The PAX-clip-rail-frame is than positioned on the rail frame as requested.



Die PCI-Beschriftungsplatte ermöglicht eine standardisierte und übersichtliche Beschriftung der Ampullenbelegung im Ampullarium oder Medikamentenschrank. Die PCI-Beschriftungsplatte lässt sich mit wenigen Handgriffen austauschen, sollte die Belegung geändert werden.

The PCI-labelling plate facilitates a standardised and clear labelling of the ampoule position within the ampoule holder or the medicine cupboard. The PCI-labelling plate can be exchanged in a few steps, if positions have to be changed.

Art.-Nr. 13353 ...

Ampullarium P5/11 M Clip-In

Dieses Ampullarium passt zu Rucksacksystem P5/11 und wird mit Magneten am Platz gehalten. Es entspricht in der Größe des Modulsystems P5/11 zwei Klarsichtmodulen „ML“ und wird hochkant im Rucksack untergebracht. Die Anzahl der unterzubringenden Ampullen variiert zwischen 40 und 90 Stück, abhängig von der Bestückung.

Ampoule holder P5/11 M Clip-In

This ampoule holder fits to the backpack system P5/11 and is fixed by magnets to its position. It corresponds to two see-through modules „ML“ within the module system of the P5/11 and is stored upright in the backpack. The quantity of the ampoules that can be stored varies between 40 and 90 pieces depending on the equipment.



Art.-Nr. 13354 ...

Ampullarium P5/11 L Clip-In

Im Modulsystem des P5/11 entspricht dieses Ampullarium dem Platz von 2 Klarsichtmodulen „L“ und wird ebenfalls per Magnet am Platz gehalten. Dieses Ampullarium bietet aktuell den meisten Medikamenten (bis 140 Ampullen) Platz. Die Mittelwand nimmt Spritzen und Kanülen auf und schützt die Ampullen gegen Druck von außen.

Ampoule holder P5/11 L Clip-In

Within the module system of the P5/11 this ampoule holder corresponds to the space of 2 see-through modules „L“ and is also fixed by magnets to its position. Currently this ampoule holder offers the most space to medicaments of up to 140 ampoules. The central partition stores syringes and canulas and protects the ampoules from pressure from the outside.



***Musterdarstellungen - Produkte werden ohne Inhalt ausgeliefert.
***Sample images - Products are delivered without content.

Ampullarium XL Clip-In POS

Passend zum PAX-Organizing-System ist das Modul Ampullarium XL Clip-In auf der Basis des XL Moduls gefertigt. Das PAX-Clip-In System wird im Boden und im Deckel auf den Kunststoffplatten montiert und nach Bedarf mit den PAX-Ampullenclips bestückt. Die mittig oder an der gegenüberliegenden Seite zu befestigende Mittelwand nimmt die Spritzen und Kanülen auf und schützt gleichzeitig die Ampullen bei besonders großem Druck von außen. Dieses Ampullarium ist mit Flauschstreifen ausgerüstet. Die Anzahl der unterzubringenden Ampullen variiert zwischen 40 und 100, je nach Bestückung und gewünschter Übersichtlichkeit.

Ampoule holder XL Clip-In POS

The module ampoule holder XL - Clip-In is manufactured basing on the XL module and is suitable for the PAX-organizing-system. The PAX-Clip-In system is mounted on the plastic plates in the bottom and on the lid and is equipped with the PAX-ampoule-clips as required. The central partition to be fixed either in the centre or to the opposite holds syringes and canulas and protects the ampoules at the same time from high pressure from the outside. This ampoule holder is fitted with Velcro straps. The quantity of ampoules that can be stored varies between 40 and 100 pieces depending on required overview and clarity.

K 24x33x10

01

TEC



Die PCI-Beschriftungsplatte ermöglicht eine standardisierte und übersichtliche Beschriftung der Ampullenbelegung im Ampullarium oder Medikamentenschrank.

Die PCI-Beschriftungsplatte lässt sich mit wenigen Handgriffen austauschen, sollte die Belegung geändert werden.

Um eine einheitliche Bestückung und Organisation zu gewährleisten, lässt sich dieses System auch problemlos im RTW im Medikamentenschrank integrieren.


The PCI-labelling plate facilitates a standardised and clear labelling of the ampoule position within the ampoule holder or the medicine cupboard.

The PCI-labelling plate can be exchanged in a few steps, if positions have to be changed.

In order to ensure a uniform equipment and organisation this system can be integrated in the ambulance vehicle or in the medicine cupboard without any problems.



Positionierung der PAX-Ampullenclips / Positioning of the PAX-ampoule-clip

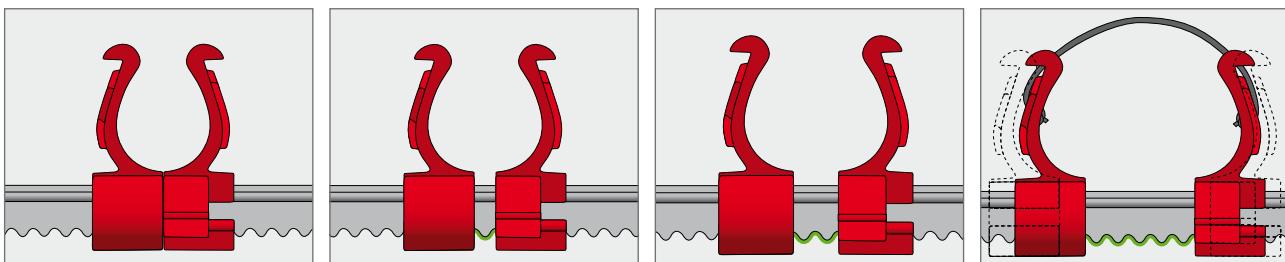

Durchmesser ca. 11 mm

z.B. 1 ml Ampulle

Approx. 11 mm in diameter

- e.g. 1 ml ampoule

Durchmesser ca. 15 mm

z.B. 5 ml Ampulle

Approx. 15 mm in diameter

- e.g. 5 ml ampoule

Durchmesser ca. 18 mm

z.B. 10 ml Ampulle

Approx. 18 mm in diameter


- e.g. 10 ml ampoule

Durchmesser > 22 mm

Abstand > 5 Zähne

Diameter > 22 mm


Distance > 5 teeth

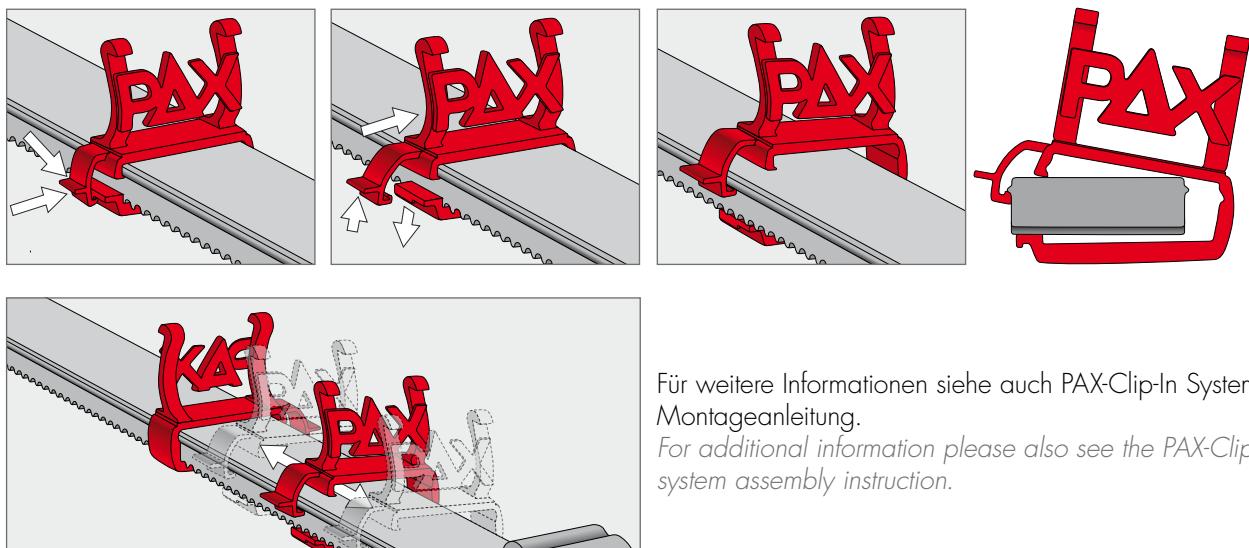

Für weitere Informationen siehe auch PAX-Clip-In System Montageanleitung.

For additional information please also see the PAX-Clip-In system assembly instruction.

Einzelteile PCI System / Individual parts PCI system

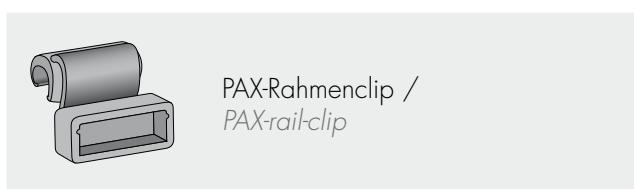

PAX-Rahmenclip /
PAX-rail-clip




PAX-Clipschiene /
PAX-clip-rail




PAX-Ampullenclip /
PAX-ampoule-clip



PCI-Beschriftungsplatte /
PCI labelling plate

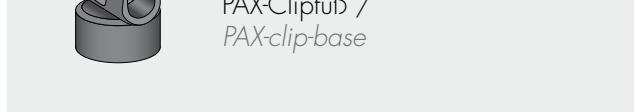

PAX-Clipfuß /
PAX-clip-base

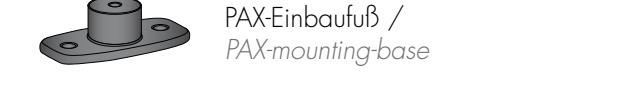

PAX-Einbaufuß /
PAX-mounting-base

Artikel PCI System / Item PCI system

13353...	1x Modul Ampullarium P5/11 M inkl. Mittelwand, 2x PAX-Clipschienenrahmen P5/11 M (ca. 266 x 222 mm), 8x PAX-Clipfuß, 8x PAX-Einbaufuß, inkl. Schrauben, 2x PCI-Beschriftungsplatte P5/11 M (ca. 290 x 230 mm), 120x PAX-Ampullenclip, 6x PAX-Clipschiene, 12x PAX-Rahmenclip 1x modul Ampoule holder P5/11 M incl. central partition, 2x PAX-clip-rail-frame P5/11 M (approx. 266 x 222 mm), 8x PAX-clip-base, 8x PAX-mounting-base, incl. screws, 2x PCI-labelling plate P5/11 M (ca. 290 x 230 mm), 120x PAX-ampoule-clip, 6x PAX-clip-rail, 12x PAX-rail-clip
13354...	1x Modul Ampullarium P5/11 L inkl. Mittelwand, 2x PAX-Clipschienenrahmen P5/11 L (ca. 326 x 282 mm), 8x PAX-Clipfuß, 8x PAX-Einbaufuß, inkl. Schrauben, 2x PCI-Beschriftungsplatte P5/11 L (ca. 350 x 290 mm), 120x PAX-Ampullenclip, 6x PAX-Clipschiene, 12x PAX-Rahmenclip 1x modul Ampoule holder P5/11 L incl. central partition, 2x PAX-clip-rail-frame P5/11 L (approx. 326 x 282 mm), 8x PAX-clip-base, 8x PAX-mounting-base, incl. screws, 2x PCI-labelling plate P5/11 L (approx. 350 x 290 mm), 120x PAX-ampoule-clip, 6x PAX-clip-rail, 12x PAX-rail-clip
13363...	1x Modul Ampullarium XL Clip-In POS inkl. Mittelwand, 2x PAX-Clipschienenrahmen XL (ca. 306 x 222 mm), 8x PAX-Clipfuß, 8x PAX-Einbaufuß, inkl. Schrauben, 2x PCI-Beschriftungsplatte XL (ca. 330 x 230 mm), 120x PAX-Ampullenclip, 6x PAX-Clipschiene, 12x PAX-Rahmenclip 1x modul Ampoule holder XL Clip-In POS incl. central partition, 2x PAX-clip-rail-frame XL (approx. 306 x 222 mm), 8x PAX-clip-base, 8x PAX-mounting-base, incl. screws, 2x PCI-labelling plate XL (approx. 330 x 230 mm), 120x PAX-ampoule-clip, 6x PAX-clip-rail, 12x PAX-rail-clip
13851...	1x PAX-Clipschienenrahmen XL (ca. 306 x 222 mm), 4x PAX-Clipfuß, 4x PAX-Einbaufuß, inkl. Schrauben, 1x PCI-Beschriftungsplatte XL (ca. 330 x 230 mm), 60x PAX-Ampullenclip, 3x PAX-Clipschiene, 6x PAX-Rahmenclip, inkl. Befestigungsmaterial 1x PAX-clip-rail-frame XL (approx. 306 x 222 mm), 4x PAX-clip-base, 4x PAX-mounting-base, incl. screws, 1x PCI-labelling plate XL (approx. 330 x 230 mm), 60x PAX-ampoule-clip, 3x PAX-clip-rail, 6x PAX-rail-clip, incl. mounting materials
13860...	1x PAX-Clipschienenrahmen P5/11 M (ca. 266 x 222 mm), 4x PAX-Clipfuß, 4x PAX-Einbaufuß, inkl. Schrauben, 1x PCI-Beschriftungsplatte P5/11 M (ca. 290 x 230 mm), 60x PAX-Ampullenclip, 3x PAX-Clipschiene, 6x PAX-Rahmenclip 1x PAX-clip-rail-frame P5/11 M (approx. 266 x 222 mm), 4x PAX-clip-base, 4x PAX-mounting-base, incl. screws, 1x PCI-labelling plate P5/11 M (approx. 290 x 230 mm), 60x PAX-ampoule-clip, 3x PAX-clip-rail, 6x PAX-rail-clip
13861...	1x PAX-Clipschienenrahmen P5/11 L (ca. 326 x 282 mm), 4x PAX-Clipfuß, 4x PAX-Einbaufuß, inkl. Schrauben, 1x PCI-Beschriftungsplatte P5/11 L (ca. 350 x 290 mm), 60x PAX-Ampullenclip, 3x PAX-Clipschiene, 6x PAX-Rahmenclip 1x PAX-clip-rail-frame P5/11 L (approx. 326 x 282 mm), 4x PAX-clip-base, 4x PAX-mounting-base, incl. screws, 1x PCI-labelling plate P5/11 L (approx. 350 x 290 mm), 60x PAX-ampoule-clip, 3x PAX-clip-rail, 6x PAX-rail-clip
13850...	1x PAX-Clipschienenrahmen XL (ca. 306 x 222 mm), 4x PAX-Clipfuß, 4x PAX-Einbaufuß, inkl. Schrauben, 1x PCI-Beschriftungsplatte XL (ca. 330 x 230 mm), 60x PAX-Ampullenclip, 3x PAX-Clipschiene, 6x PAX-Rahmenclip 1x PAX-clip-rail-frame XL (approx. 306 x 222 mm), 4x PAX-clip-base, 4x PAX-mounting-base, incl. screws, 1x PCI-labelling plate XL (approx. 330 x 230 mm), 60x PAX-ampoule-clip, 3x PAX-clip-rail, 6x PAX-rail-clip
13725...	40x PAX-Ampullenclip 40x PAX-ampoule-clip
13726...	20x PAX-Ampullenclip, 1x PAX-Clipschiene, 2x PAX-Rahmenclip 20x PAX-ampoule-clip, 1x PAX-clip-rail, 2x PAX-rail-clip



X-CEN-TEK GmbH & Co. KG

Westerburger Weg 30
26203 Wardenburg
Deutschland / Germany

Tel./Phone: +49 (0)44 07 - 7 14 76 - 0
Fax/Fax-No: +49 (0)44 07 - 7 14 76 - 99

E-Mail: info@pax-bags.de

www.pax-bags.de

