



# Datenblatt PAX Roll-Up Stretcher light – tactical

Ausführung gemäß DIN EN 1865-1

Art.-Nr. 279576003

## PAX Roll-Up Stretcher light – tactical

Kleines und leichtes Transportmittel zur Evakuierung von Personen aus dem Gefahrenbereich. Dank der Verstärkung am Boden kann der PAX Roll-Up Stretcher light – tactical auch gezogen werden. Dadurch kann das Produkt von nur einer Person bedient werden. Ausführung inkl. Transporttasche mit Molle. Auslieferung inkl. 1Stk. Schleppschlinge mit 3 m Länge.



- 52 cm x Ø14 cm (aufgerollt, in Tasche)
- 212 cm x 50 cm (ausgerollt)
- ca. 2 kg (inkl. Tasche und Schleppschlinge)


03

LDPE\*

PRO

\*Material Kunststoffplatte teilrecycl.

**Steckschnalle**  
in beide Richtungen  
verstellbar

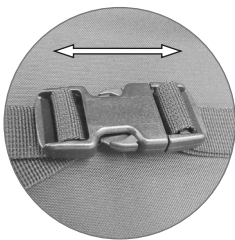

**Befestigungspunkt**  
für Begurtung



**Handgriff**  
jeweils 2 an Kopf-  
und Fußende



**Fach**  
für die Schlepp-  
schlinge



**Gummischlaufe im  
Deckel** für optionale  
zusätzliche Band-  
schlingen



**Tasche mit MOLLE-  
Schlaufen** zur uni-  
versalen Befestigung  
an der Ausrüstung



**Hersteller:**  
X-CEN-TEK GmbH & Co. KG  
Westerburger Weg 30  
D-26203 Wardenburg

Tel.: +49 (0) 44 07 - 7 14 76 0  
Fax: +49 (0) 44 07 - 7 14 76 99  
Email: info@pax-bags.de  
Internet: www.pax-bags.com

Stand: August 2023