


it's all about performance



**PAX Rettungs- und Transportsysteme**

**PAX**

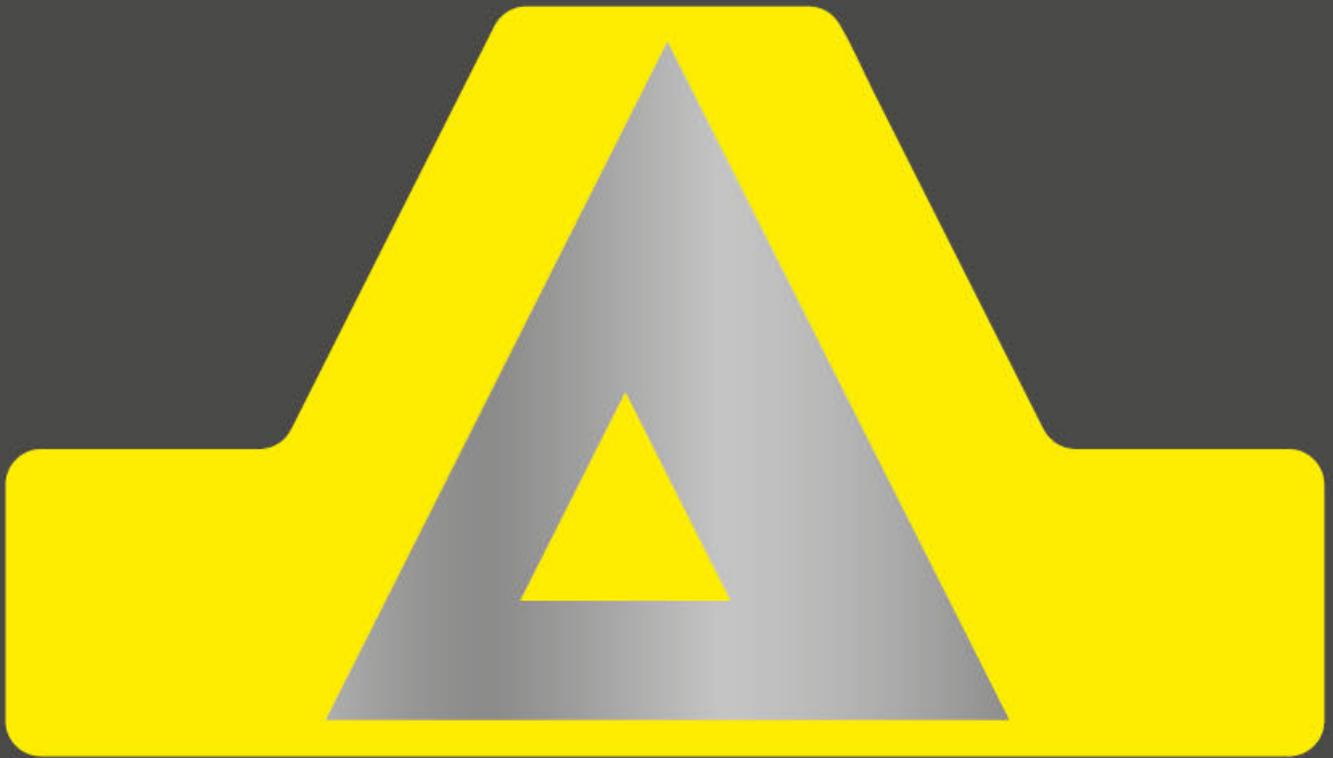

## PAX Vakuumprodukte



### Im Einsatz für dich da

Wir verwenden für die PAX Vakuumprodukte speziell von uns ausgewählte und nach unseren Vorgaben angefertigte Materialien. In Kombination mit unserer Produktphilosophie „it's all about performance“ sind Produkte mit hohem Nutzungsgrad für Retter und Patient

entstanden. Unsere leichten und robusten Materialien, kombiniert mit unserem Design und den systemübergreifenden Komponenten machen aus den PAX Vakuumprodukten deinen Partner im Einsatz.

### Entdecke dein Rettungs- und Transportsystem:

#### PAX Vakuumprodukte

Allgemeine Informationen

Seite 1 - 3

#### PAX Vakuumschienen

Hinweise und Produktvarianten

Seite 4 - 9

#### PAX Vakuummatratzen

Hinweise und Produktvarianten

Seite 10 - 19

#### PAX RTS

Produktvarianten, Tragetücher

Seite 20 - 35

#### PAX Vakuum Ersatzteile

Hilfreiches Zubehör

Seite 36 - 45

Allgemeine Informationen

Seite 46 - 49

## PAX Produkte für den täglichen Einsatz

Du sollst dich auf dein PAX Produkt verlassen können, wie der Patient sich auf deine Fähigkeiten verlassen muss.

Seit über 20 Jahren entwickeln wir bei PAX hochwertige Ausrüstung, die Design, Funktionalität und Belastbarkeit auf höchstem Niveau vereint. Dabei setzen wir auf innovative Materialien und neueste Technologien – immer mit dem Ziel, praxisnahe Lösungen zu schaffen, die im Einsatz überzeugen. Unsere Erfahrung aus dem realen Einsatz sowie der enge Austausch mit den Anwendern fließen kontinuierlich in die Weiterentwicklung unserer PAX Produkte ein. Formgebung, Farbauswahl und Materialwahl sind dabei stets auf den jeweiligen Verwendungszweck abgestimmt – für ein Ergebnis, das höchsten Ansprüchen gerecht wird. Nur wenn du mit dem PAX Produkt im Einsatz zufrieden bist, sind wir es auch.

In dieser Broschüre „PAX Rettungs- und Transportsysteme“ präsentieren wir dir eine Auswahl unserer neuesten Entwicklungen und überarbeiteten Klassiker. Noch mehr durchdachte Lösungen findest du online unter [www.pax-bags.com](http://www.pax-bags.com).

Zertifiziertes Qualitätsmanagement für Medizinprodukte





## Schichtweiser Aufbau

Unsere PAX Vakuummatratzen zeichnen sich durch ein Mehrkammersystem mit 2-schichtigem Aufbau aus. Die EPS-Perlen der patientenseitigen Schicht lassen sich großflächig verteilen und ermöglichen dadurch eine effektive und körpergerechte Anformung der Matratze an den Patienten. Das Kammersystem der patientenfernen Schicht ist je nach Matratzenform so aufgeteilt, dass die notwendige Stabilität der angeformten Vakuummatratze gewährleistet wird.

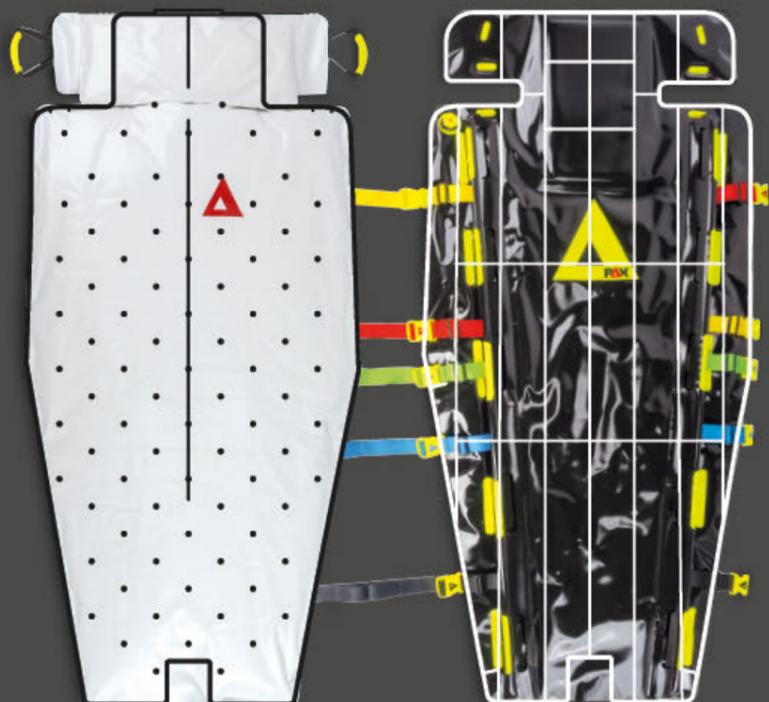


Abb. ähnlich

Abb. ähnlich



### Kompakt wie du es brauchst

Darüber hinaus sorgt der Schichtaufbau auch dafür, dass du für deinen Einsatz alles auf kleinstem Raum verstauen kannst.

### Gut verpackt ist halb gewonnen

Unsere Transporttaschen sind passgenau auf die PAX Vakuumprodukte abgestimmt und erleichtern so die platzsparende Lagerung bzw. den Transport. Mit ihnen ist dein Vakuumprodukt auf dem Weg zum Einsatz immer gut geschützt und hygienisch verpackt. Sie sind in drei verschiedenen Größen erhältlich.



## PAX Vakuumprodukte

Praktisch – durchdacht

PAX Vakuumprodukte sind lässig, sogar röntgendurchlässig.

Alle PAX Vakuumprodukte sind geprüft gemäß EN 1865-1 und sehr gut röntgenstrahlendurchlässig.



### Fühlt sich gut an

Durch den Einsatz unseres PAX-Flex Tec MP Material ist die Oberfläche deiner PAX Vakuummatratze oder deiner PAX Vakuumschienen weich und anschmiegsam. Dies erhöht den Patientenkomfort deutlich.



### Einfach und sicher – mit Steckverschlüssen



Unsere PAX Vakuumprodukte verzichten zur Gurtfixierung auf ein Klettsystem und setzen hier die PAX Steckschnallen ein – die sind besser zu reinigen. Besonders beim Öffnen wird hierdurch ein ungewolltes Bewegen der Extremitäten des Patienten vermindert. Das Wohl des Patienten steht bei uns im Mittelpunkt.




### Weil 's sauber sein muss




Unsere Materialien sind auf intensive Reinigung und Desinfektionen getestet. Darauf kannst du dich verlassen. Auch deine Tragegriffe machen da keine Ausnahme, denn sie sind geschlossenporig und somit perfekt zu reinigen. Dies gilt auch für die Gurtaufnahmen, die von innen eingeschweißt sind, um eine glatte Oberfläche beizubehalten.

Die PAX Vakuumprodukte sollten nach jedem Einsatz auf Beschädigungen und Verschmutzungen geprüft und wieder aufbereitet werden. Nach der Reinigung mit einem feuchten Tuch, erfolgt die Desinfektion der PAX Vakuumprodukte mit einem Standard Desinfektionsmittel.


## PAX Vakuumschiene - Unterarm

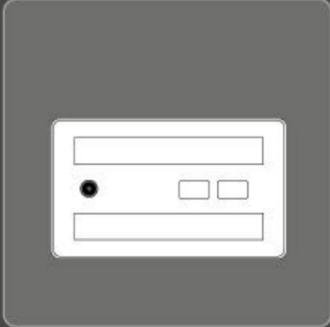


## PAX Vakuumschiene - rec - Arm

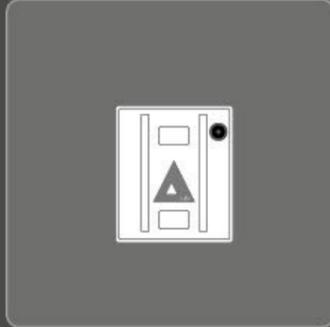


## PAX Vakuumschiene - Ellenbogen

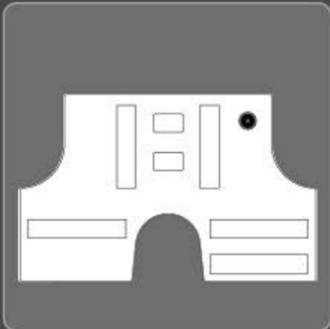


## PAX Vakuumschiene - rec - Gelenk

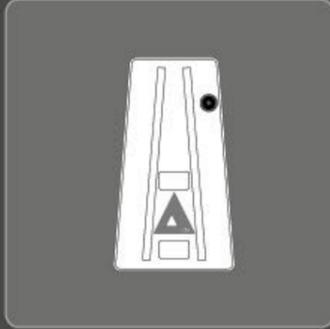

## PAX Vakuumschiene - Bein

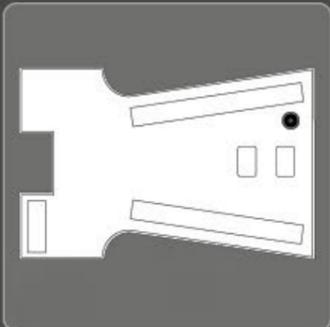

## PAX Vakuumschiene - rec - Bein

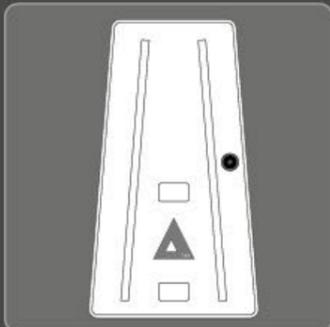

## PAX Vakuumschienen

### Unser System für die Immobilisation der Extremitäten

Unsere beiden unterschiedlichen PAX Vakuumschienen-systeme ermöglichen eine schnelle und effektive Immobilisation der Extremitäten im täglichen Einsatz.

In zwei verschiedenen Materialkombinationen und Formen sind die Schienen für viele Situationen sehr gut anwendbare Hilfsmittel.



Diese Produkte können individuell gekennzeichnet werden!



Vorlage für die individuelle Kennzeichnung deiner PAX Vakuumprodukte:  
<https://pax-bags.com/go/kennzeichnung>

Art.-Nr. 155535210

## PAX Vakuumschiene - Unterarm

Unsere gut anmodellierbare Unterarmschiene wird mit variabel positionierbaren Fixiergurten sicher am Patienten befestigt und besteht aus dem weichen und für den Patienten angenehmen PAX-Flex Tec MP Material.

50x32 0,35



CE MD



Art.-Nr. 155545210

## PAX Vakuumschiene - Bein

Mit unserer gut anmodellierbaren Beinschiene kann der Patient sicher versorgt werden. Durch Verschließen der unteren Steckschnallen wird die PAX Vakuumschiene - Bein 3-dimensional vorgeformt, wodurch eine sehr gute Stabilisation erreicht wird. Mit den variabel positionierbaren Fixiergurten wird die Schiene sicher am Patienten befestigt. Die PAX Vakuumschiene - Bein besteht aus dem sehr weichen und für den Patienten angenehmen PAX-Flex Tec MP Material.

97x66 1,05



CE MD




Diese Produktserie zeichnet ein besonders geringes Gewicht aus!

Art.-Nr. 15555210

## PAX Vakuumschiene - Ellenbogen

Die PAX Vakuumschiene - Ellenbogen kann vor dem Anlegen durch Verbinden der unteren Steckschnallen 3-dimensional vorgeformt werden. Dies ermöglicht ein effektives Anlegen und Anmodellieren der Schiene. Mit den variabel positionierbaren Fixiergurten wird die Schiene sicher am Patienten befestigt. Die PAX Vakuumschiene - Ellenbogen besteht aus unserem weichen und für den Patienten angenehmen PAX-Flex Tec MP Material.

52x69 0,50

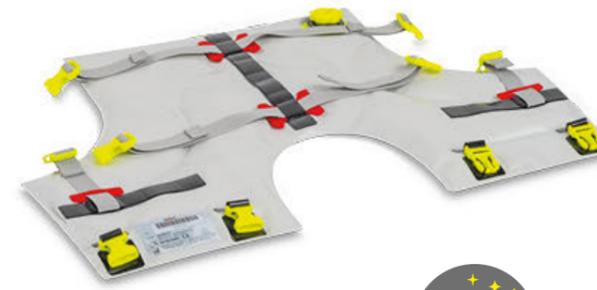

Hygienische Reinigung und Desinfektion durch glatte Oberflächen!

CE MD



Art.-Nr. 1575000005

## PAX Vakuumschienen - Set

Natürlich sind unsere PAX Vakuumschienen auch als Set erhältlich. So kannst du alle Designs platzsparend in der im Lieferumfang enthaltenen PAX Transporttasche unterbringen.

35x50x14 2,30



### PAX Vakuumschienen - Set bestehend aus:

- 1x PAX Vakuumschiene - Bein
- 1x PAX Vakuumschiene - Unterarm
- 1x PAX Vakuumschiene - Ellenbogen
- 1x PAX Transporttasche

CE MD




Art.-Nr. 162025210

## PAX Vakuumschiene - rec - Arm

Die PAX Vakuumschiene - rec - Arm hat für schnelles Anlegen am Arm eine einfache Form und wird mittels Fixiergurten mit Steckschnallen am Patienten befestigt. Die Unterseite der Schiene besteht aus dem robusten PAX-Tec Plus MP, während die Patientenseite aus dem weichen und anpassungsfähigen PAX-Flex Tec MP Material gefertigt ist. Dies erleichtert einfaches Anpassen an die Anatomie des Patienten.

55x47 0,58

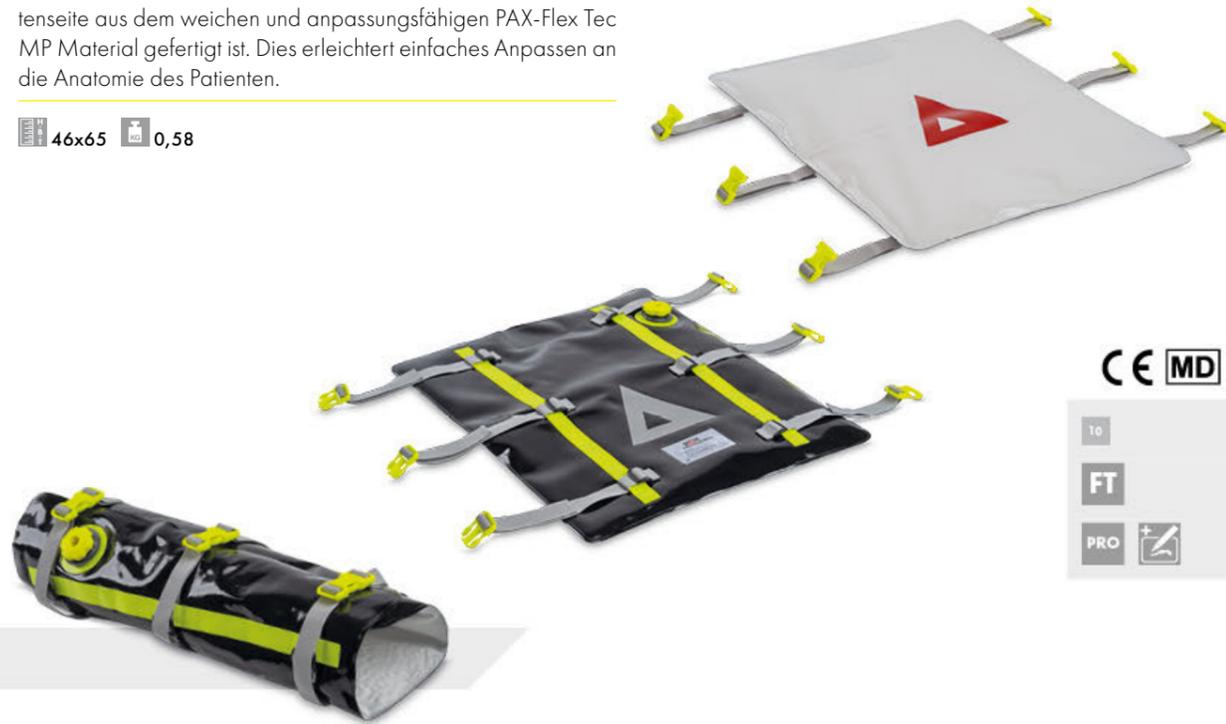

 Diese Produktserie zeichnet eine besonders strapazierfähige Außenseite aus!

CE MD



Art.-Nr. 162035210

## PAX Vakuumschiene - rec - Gelenk

Die PAX Vakuumschiene - rec - Gelenk besteht aus dem robusten PAX-Tec Plus MP auf der Unterseite sowie dem weichen und anpassungsfähigen PAX-Flex Tec MP Material auf der Patientenseite. Die einfache Form in Kombination mit den Fixiergurten inklusive Steckschnallen erleichtert das schnelle Anlegen am Patienten.

55x47 0,49



CE MD



Für den Fall der Fälle:  
Art.Nr. 157510000  
PAX Reparaturaufkleber  
Vakuum



Art.-Nr. 162265210

## PAX Vakuumschiene - rec - Bein

Unsere PAX Vakuumschiene - rec - Bein besteht aus dem robusten PAX-Tec Plus MP Material auf der Unterseite sowie dem weichen und anpassungsfähigen PAX-Flex Tec MP Material auf der Patientenseite, was schnelles Anpassen an die Anatomie des Patienten ermöglicht.

55x47 1,30



CE MD




Art.-Nr. 1624000005

## PAX Vakuumschienen - rec - Set

Natürlich sind unsere PAX Vakuumschienen - rec auch als Set erhältlich. Du kannst die verschiedenen Designs platzsparend in der im Lieferumfang enthaltenen PAX Transporttasche verstauen. Die Schienen bestehen aus dem strapazierfähigen PAX-Tec Plus MP Material auf der Unterseite sowie dem weichen und anpassungsfähigen PAX-Flex Tec MP Material auf der Patientenseite. Das erleichtert das schnelle Anmodellieren an die Anatomie des Patienten.

35x50x14 2,90

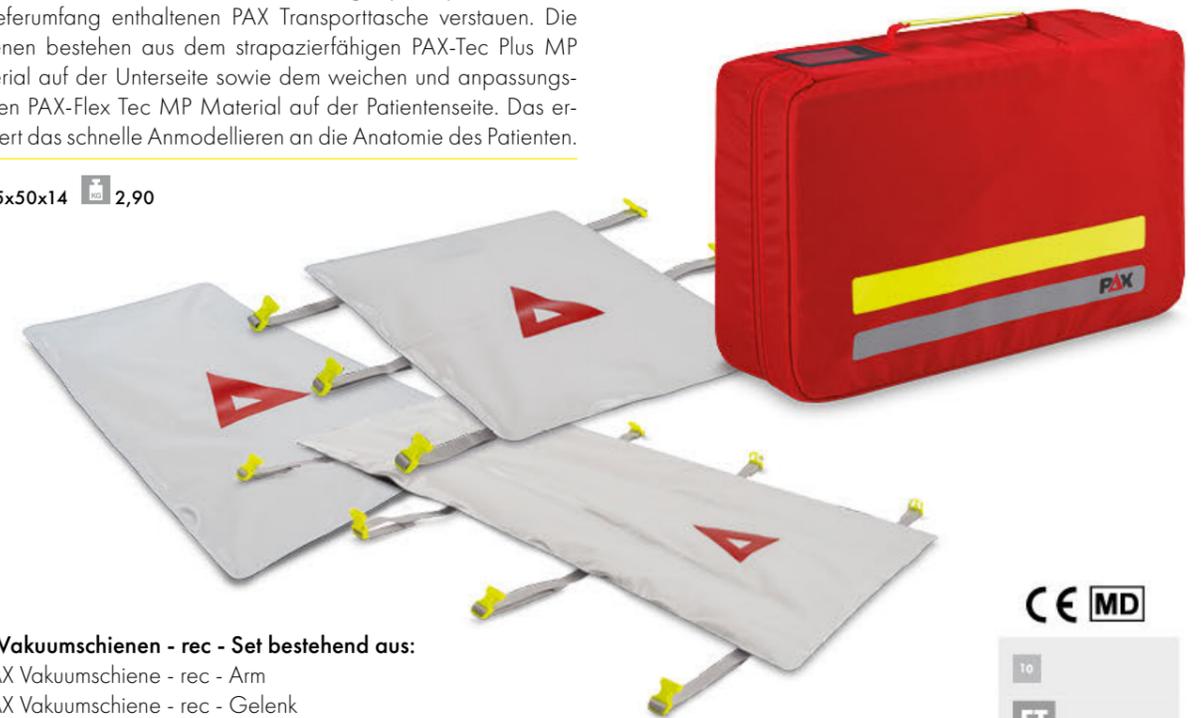

 Diese Produkte können individuell gekennzeichnet werden!

CE MD



### PAX Vakuumschienen - rec - Set bestehend aus:

- 1x PAX Vakuumschiene - rec - Arm
- 1x PAX Vakuumschiene - rec - Gelenk
- 1x PAX Vakuumschiene - rec - Bein
- 1x PAX Transporttasche


## Sei flexibel im Einsatz – bei jeder Größe

Weil du im Einsatz nicht weißt, was dich erwartet, sind unsere PAX Vakuummatratzen so aufgebaut, dass sie eine große Bandbreite an Patientengrößen und Gewichtsklassen abdecken können. Dafür sorgt unter anderem das gut verschiebbare Füllmaterial des Schicht- und Mehrkammersystems.



## Eine Klasse für sich – ein gutes Gefühl

Unser PAX Anspruch auf den du setzen kannst.

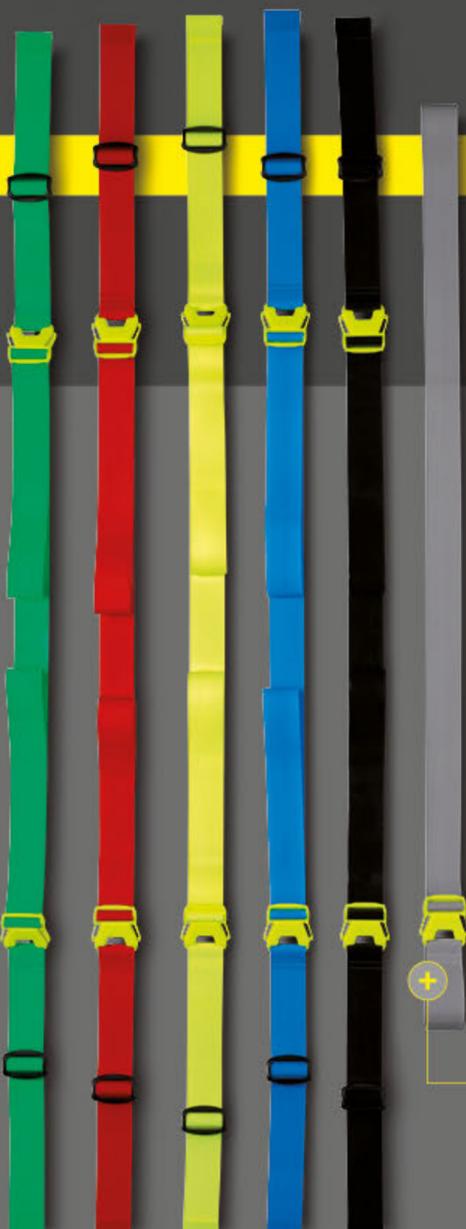

## Einfach, wie weggewischt

Die PAX TPU Fixiergurte sind durch die Materialauswahl mit geschlossenen Oberflächen leichter zu reinigen, als Gurte aus herkömmlichen Gewebe. Schneller und einfacher wieder einsatzbereit.

## Kein Druck

Die ausgeklügelte Anordnung der Steckschnallen an den Seiten und nicht mittig auf der Matratze vermeidet punktuellen Druck beim immobilisierten Patienten durch aufliegende Schnallen.

## 5 ist Trumpf

PAX TPU Fixiergurte haben eine Farbkennung. Das hilft dir im Einsatz einen „kühlen Kopf zu bewahren“ und minimiert die Gefahr einer Fehlanwendung im Sinne der integrierten Sicherheit für Patienten und Anwender.

## Einer für alle

Bei unseren PAX Vakuummatratzen verwenden wir nur ein Gurtsystem. Du brauchst keine verschiedenen Systeme, sondern kannst immer einen Fixiergurt (auch aus dem Zubehör) für alle Komponenten im System nutzen.



Im Lieferumfang enthalten: Dieser Gurt ist die individuell nutzbare universelle Gurtverlängerung.

## PAX Vakuummatratzen

### Qualität in Form

Die Vorteile durch anwenderorientierte Produktentwicklung setzen sich bei unseren PAX Vakuummatratzen fort. Sie eignen sich für die Immobilisierung von Patienten

mit Verdacht auf Knochen- und Wirbelsäulenverletzungen sowie Schädel-Hirn- oder Polytrauma. Sie umschließen den Patienten und bieten im abgesaugten Zustand eine

sehr gute Unterstützung und Stabilisierung. Unsere PAX Vakuummatratzen erfüllen die Empfehlungen der S3 Richtlinie - Polytrauma.




## PAX Vakuummatratze - I-Mat - Griffe

Die PAX Vakuummatratze - I-Mat - Griffe ist unser Einsteigerprodukt und wird mit der gleichen PAX-Sorgfalt hergestellt wie alle unsere Produkte. Der gerade Schnitt erinnert an ein groß geschriebenes „I“ und ist optimiert für den Einsatz im Sanitätsbereich. Die PAX I-Mat wird mit zehn einschlaufbaren Griffen und unseren 5 farblich codierten Fixiergurten ausgeliefert. Für eine bessere Reinigung sind die Gurt- und Trageschlaufenösen von innen eingeschweißt, um eine glatte Oberfläche zu gewährleisten. Das Material der Tragegriffe ist komplett geschlossenporig. Um Druckstellen am Patienten zu vermeiden sind die Steckschnallen seitlich an der Matratze angebracht. Auch bei diesem Modell ist die individuell nutzbare Gurtverlängerung bereits im Lieferumfang enthalten. Die PAX Vakuummatratze - I-Mat - Griffe erfüllt die Anforderungen der Norm EN 1865-1 sowie die Empfehlungen der S3 Leitlinie - Polytrauma und ist an der dem Patienten zugewandten Seite aus sehr weichen und angenehmen PAX-Flex Tec MP Material gefertigt.

80x202 6,20

1x 20x65x95 2x 27x65x60

CE MD

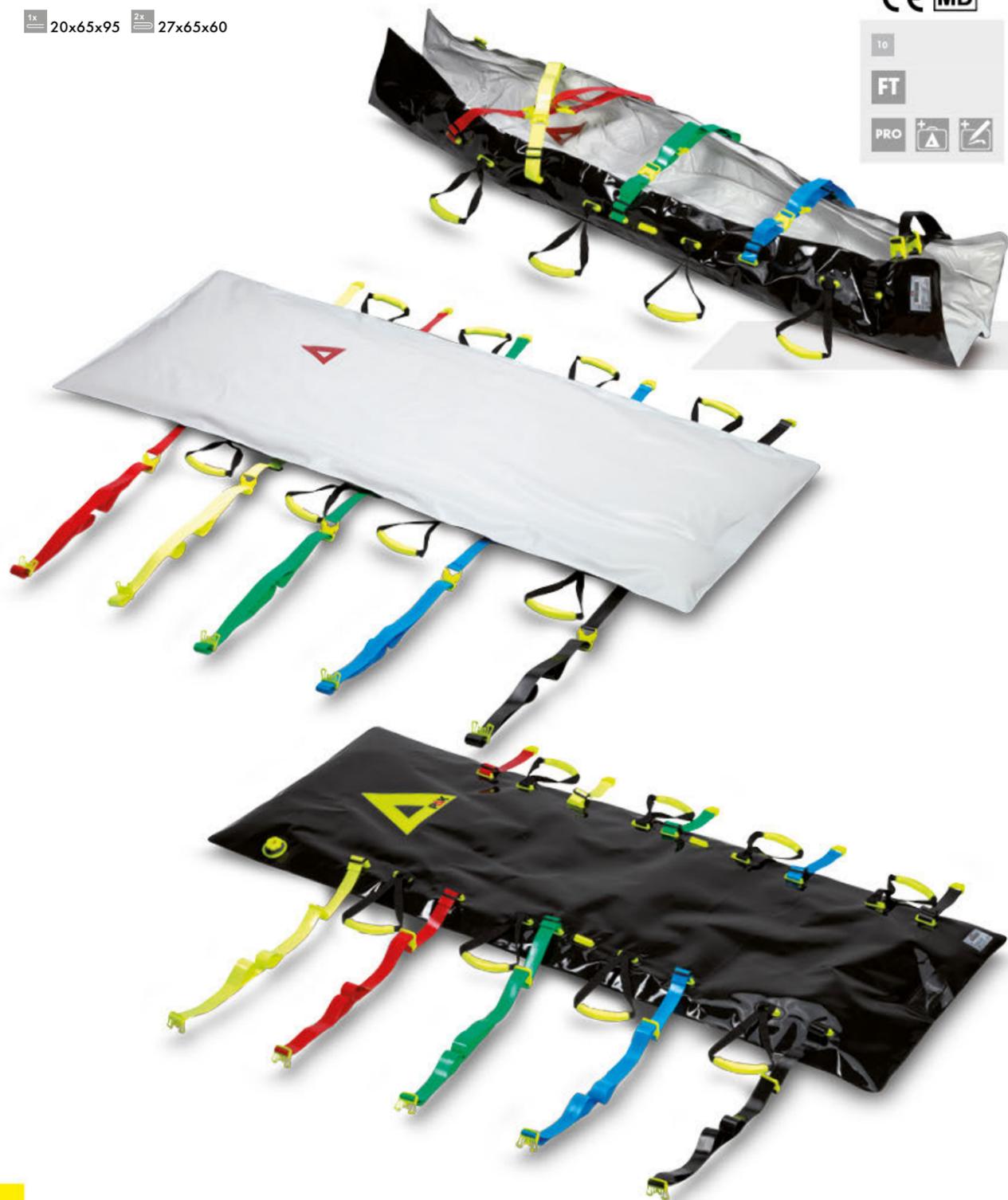

## PAX Vakuummatratze - I-Mat - Griffe - tactical

Die PAX Vakuummatratze - I-Mat - Griffe - tactical ist unser robustes Einsteigermodell für den taktischen Bereich und wird mit der bewährten Sorgfalt und Qualität von PAX gefertigt. Ihr geradliniger Zuschnitt, der an ein großes „I“ erinnert, bietet optimale Voraussetzungen für eine schnelle und effiziente Immobilisation im Einsatz. Diese Vakuummatratze ist komplett in Schwarz mit olivfarbenen Applikationen gehalten und ist speziell für taktische Anforderungen konzipiert. Im Lieferumfang enthalten sind 10 einschlaufbare Griffe sowie fünf schwarze Fixiergurte, die eine sichere und flexible Patientenlagerung ermöglichen. Die Gurt- und Griffösen sind innenliegend verschweißt, wodurch eine glatte, leicht zu reinigende Oberfläche entsteht. Die Tragegriffe bestehen aus geschlossenporigem Material und die seitlich angebrachten Steckschnallen tragen dazu bei, Druckstellen beim Patienten zu minimieren. Verpackt wird die I-Mat tactical in der strapazierfähigen PAX Transporttasche für Vakuummatratzen. Die PAX Vakuummatratze - I-Mat - Griffe - tactical bietet eine zuverlässige Lösung für professionelle Einsätze unter anspruchsvollen Bedingungen.

80x202 4,98

CE MD



Art.-Nr. 155145210

### PAX Vakuummatratze - Mummy-Mat - Griffleiste

Mit der PAX Vakuummatratze - Mummy-Mat - Griffleiste haben wir uns an der Körperform orientiert und diese als ein übergroßes „V“ geformt. Das „V“-Übermaß ermöglicht aufgrund der größeren Spannweite ab dem Becken eine verbesserte Immobilisierung des Patienten. Diese Ausführung verfügt für den Transport über eine Griffleiste. Die Vakuummatratze kann über die Seiten hinaus um den Patienten anmodelliert werden. Mit Hilfe der farbcodierten Fixiergurte wird der Patient gesichert. Die Gurt- und Trageschlaufenösen sind für die bessere Reinigung von innen eingeschweißt, um eine glatte Oberfläche zu gewährleisten. Das Material der Tragegriffe ist komplett geschlossenporig. Die Steckschnallen sind seitlich der Matratze angebracht, um Druckstellen am Patienten zu vermeiden. Unsere PAX Vakuummatratze - Mummy-Mat - Griffleiste erfüllt die Anforderungen der Norm EN 1865-1 sowie die Empfehlungen der S3 Leitlinie - Polytrauma und ist an der dem Patienten zugewandten Seite aus dem sehr weichen und angenehmen PAX-Flex Tec MP Material gefertigt. Die passende Transporttasche sowie die individuell nutzbare Gurtverlängerung sind bereits im Lieferumfang enthalten.

97x202 6,26

1x 18x90x97 2x 26x90x62

CE MD



Diese Produkte können individuell gekennzeichnet werden!

Art.-Nr. 155155210

### PAX Vakuummatratze - Mummy-Mat - Griffe

Die PAX Vakuummatratze - Mummy-Mat - Griffe ist baugleich mit der Ausführung mit Griffleiste, verfügt für den Transport aber über einschlaufbare Griffe. Mit der PAX Vakuummatratze - Mummy-Mat - Griffe haben wir uns an der Körperform orientiert und diese als ein übergroßes „V“ geformt. Das „V“-Übermaß ermöglicht aufgrund der größeren Spannweite ab dem Becken eine verbesserte Immobilisierung des Patienten. Sie kann über die Seiten hinaus um den Patienten anmodelliert werden, der Patient wird mit Hilfe der farbcodierten Fixiergurte gesichert oder fixiert. Die Gurt- und Trageschlaufenösen sind für die bessere Reinigung von innen eingeschweißt, um eine glatte Oberfläche zu gewährleisten. Das Material der Tragegriffe ist komplett geschlossenporig. Die Steckschnallen sind seitlich der Matratze angebracht, um Druckstellen am Patienten zu vermeiden. Eine individuell nutzbare Gurtverlängerung sowie die passende Transporttasche sind bereits im Lieferumfang enthalten.

97x202 5,85

1x 15x90x95 2x 23x90x62

CE MD



Für den Fall der Fälle:  
PAX Reparaturaufkleber  
für PAX Vakuumprodukte  
(Art.Nr.: 157510000)



## PAX Vakuummatratze - Mummy-Mat - Plus - Griffe & Kopffixierung

Die PAX Vakuummatratze - Mummy-Mat - Plus - Griffe & Kopffixierung haben wir nach Kundenspezifikationen entwickelt und als Medizinprodukt zugelassen. Die besonderen Anforderungen an Gewicht und Stauvolumen haben wir mittels der verwendeten PAX-Materialien, der speziellen Kammereinteilung und der patentierten Kopffixierung gelöst.



95x230 5,62



1x 11x90x97 2x 20x90x63



Vorlage für die individuelle Kennzeichnung deiner PAX Vakuumprodukte:  
<https://pax-bags.com/go/kennzeichnung>

### Du entscheidest was du kennzeichnen willst

PAX Vakuummatratzen und PAX Vakuumschienen bieten ein gut überschaubares Feld für deine individuelle Kennung und Markierung – gut sichtbar, groß genug und transparent geschützt. Wir bieten dir für die individuelle Kennzeichnung eine Formatvorlage, die du auf unserer Webseite gestalten kannst.

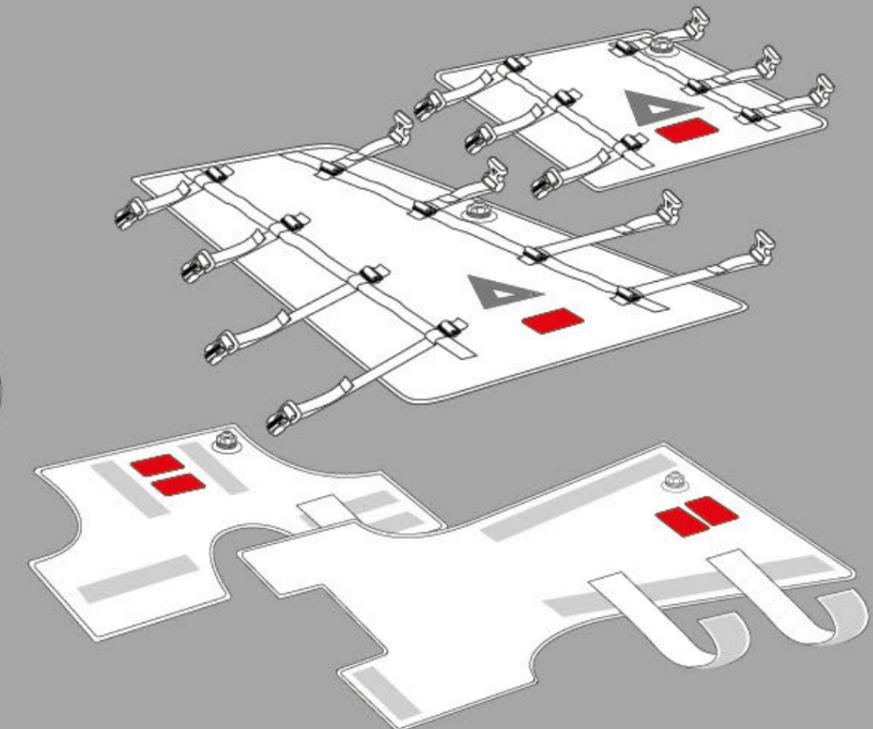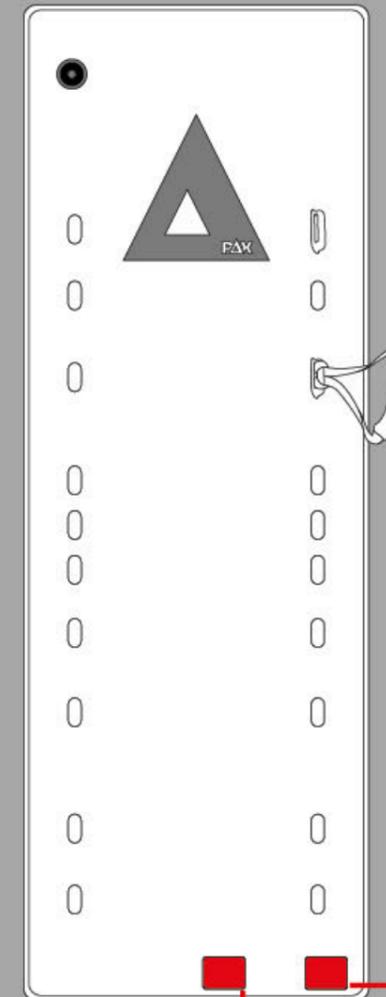

↑ Produktspezifische Kennzeichnungskarte



← Kundenspezifische Kennzeichnungskarte

## PAX Vakuummatratze - Ergo-Mat - Griffleiste & Kopffixierung

Bei diesem Modell „PAX Ergo-Mat mit integrierter Kopffixierung und Nackenunterstützung“ haben wir für den Transport eine Griffleiste angebracht. Unser neues, patentiertes Kopffixationssystem und die integrierte Nackenunterstützung verhindern die Hyperreklination der Halswirbelsäule bei Tragetransport. Die Kopffixierung wird zusammen mit der Matratze abgesaugt und gibt dem Kopf somit wesentlich mehr Halt. Auch sie verfügt für die schnelle Zuordnung über farblich codierte Fixiergurte mit tagesleuchtgelben Steckschnallen. Die Gurtschlaufenösen sind für die bessere Reinigung von innen eingeschweißt, um eine glatte Oberfläche zu gewährleisten. Das Material der Tragegriffe ist komplett geschlossenporig. Eine individuell nutzbare Gurtverlängerung, die passende Transporttasche sowie die Fixierstreifen sind bereits im Lieferumfang enthalten. Die Kopf-Fixierstreifen sind auch als 10er Set als Ersatzteil erhältlich.

94x200 5,20



CE MD



Diese Produkte können individuell gekennzeichnet werden!



Art.-Nr. 257470401  
PAX Transporttasche  
Vakuummatratze  
auch einzeln im  
Zubehör erhältlich.

## PAX Vakuummatratze - Ergo-Mat - Griffe & Kopffixierung

Bei diesem Modell „PAX Ergo-Mat mit integrierter Kopffixierung und Nackenunterstützung“ haben wir für den Transport Griffe angebracht. Unser neues, patentiertes Kopffixationssystem und die integrierte Nackenunterstützung verhindern die Hyperreklination der Halswirbelsäule bei Tragetransport. Die Kopffixierung wird zusammen mit der Matratze abgesaugt und gibt dem Kopf somit wesentlich mehr Halt. Auch sie verfügt für die schnelle Zuordnung über farblich codierte Fixiergurte mit tagesleuchtgelben Steckschnallen. Die Gurt- und Trageschlaufenösen sind für die bessere Reinigung von innen eingeschweißt, um eine glatte Oberfläche zu gewährleisten. Das Material der Tragegriffe ist komplett geschlossenporig. Eine individuell nutzbare Gurtverlängerung, die passende Transporttasche sowie die Fixierstreifen sind bereits im Lieferumfang enthalten. Die Kopf-Fixierstreifen sind auch als 10er Set als Ersatzteil erhältlich.

95x196 7,30

1x 17x90x95 2x 23x90x60

CE MD



### PAX Kopffixierung

Die PAX Kopffixierung wird zusammen mit der PAX Vakuummatratze abgesaugt und gibt dem Patienten Kopf somit wesentlich mehr Halt. Die Fixierstreifen sind im Lieferumfang enthalten und auch als Einzel oder 10er Set im Zubehör als Ersatzteil erhältlich. Das patentierte Kopffixationssystem und integrierte Nackenunterstützung verhindern die Hyperreklination der Halswirbelsäule bei Tragetransport.

# PAX

it's all about performance

QR Code scannen und weitere Informationen zum Produkt ansehen:



Die PAX Vakuummatratze - AR 2 ist für den PAX Rettungssack RTS AIR konzipiert.

Art.-Nr. 155585201

## PAX Vakuummatratze - AR 2

Wir haben hier besonders leichte und strapazierfähige Materialien miteinander kombiniert, um die Anforderungen der Lufttretung zu erfüllen. Die Mehrkammer-2-Lagen-Füllung gibt dieser Matratze ausreichend Steifigkeit. Im Fußbereich haben wir wegen der häufig anzutreffenden Skischuhe das Außenmaterial auch patientenseitig verarbeitet. Die Handgriffe sind direkt an der Matratze fixiert, um Gewicht und Platz zu sparen. Im Nackenbereich unterstützt eine Einlage den besonders sensiblen Bereich.

73x240 4,30

1x 16x60x100 2x 24x60x60



CE MD

01

FT

PRO



## PAX Vakuumprodukte Spezial

Vakuummatratzen für besondere Einsatzzwecke

Unsere PAX Vakuumprodukte haben wir in einer Standardrange entwickelt. Aber so wie ihr es von PAX gewohnt seid, gibt es natürlich auch Sonderanfertigungen.

Wir stellen uns der Herausforderung und passen die Produkteigenschaften und spezifischen Anforderungen an eure Einsatzzwecke an.



QR Code scannen und Film zum PAX Rettungssack RTS AIR schauen:



Art.-Nr. 2724908015

## PAX Rettungssack RTS AIR

Der PAX Rettungssack RTS AIR zeichnet sich durch den konsequenten Verzicht von Klett aus, um die sicherheitsrelevanten Seile und Gurte für das Winschen zu schützen. Mit dem umlaufenden Reißverschluss kann der PAX Rettungssack RTS AIR auch bei widrigen Bedingungen von einer Person bedient werden. Das innenliegende Schnürsystem im Kopfbereich und die farblich gekennzeichneten Kompressionsgurte ermöglichen ein schnelles Anpassen des PAX Rettungssacks an den Patienten.

Für besondere Sicherheit sorgt das redundant ausgelegte Schlaufensystem zur Befestigung des Gehänges für den Transport als Außenlast am Helikopter. Senkrecht Bergen oder Abseilen ist ebenfalls möglich und erlaubt. Alle Schlaufen und Seile sind sicher in Taschen verstaut.

Der PAX Rettungssack RTS AIR ist nach den Anforderungen der EUROCAE ED-14G / RTCA DO-160G für Loose Equipment geprüft und erfüllt die „Category U2 - Unknown Helicopter Frequencies“. Die Prüfungen sind nach DIN EN 60068-2-64:2009 (Schwingprüfung) und DIN EN 60068-2-27:2010 (Schockprüfung) im Prüflabor TÜV SÜD durchgeführt worden.

Der PAX Rettungssack RTS AIR kann somit ohne weitere Nachweise im Flugbetrieb genutzt werden.

70x200 7,80

CE MD

01

D


PRO



### Single-Use Fixiergurte

bestehend aus Kombibändern  
(Haken / Flanschband)

- ▲ Gewichtssparend
- ▲ Hygienischer
- ▲ Kein Reinigungsaufwand
- ▲ Individuell anpassbar
- ▲ Schnell austauschbar

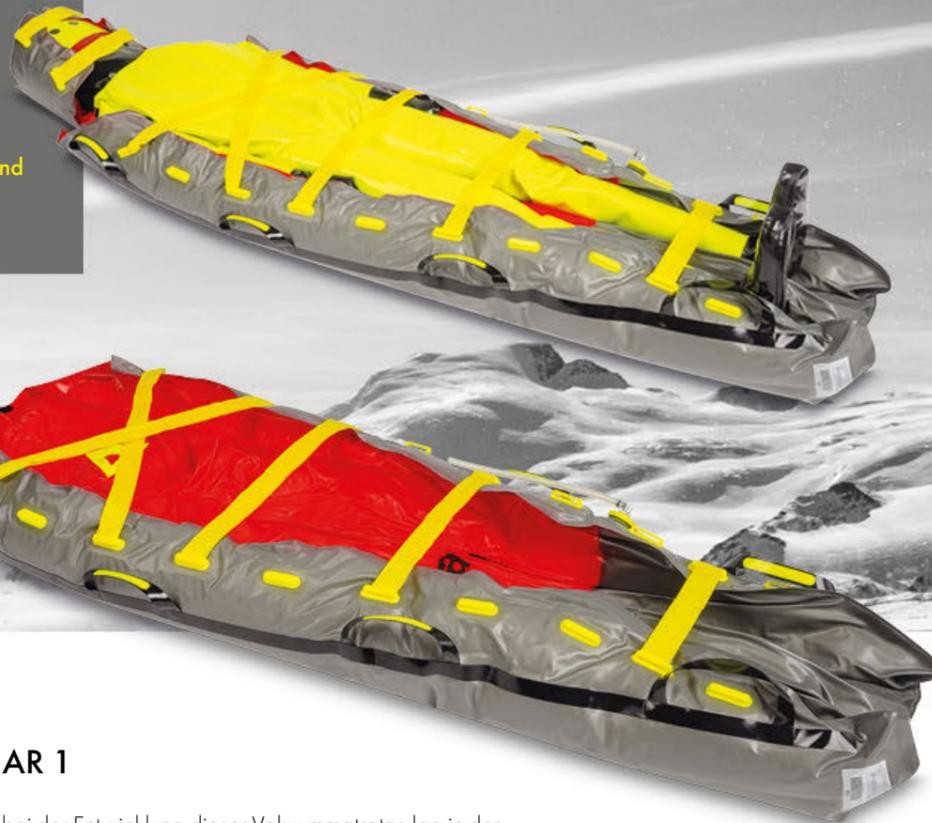

Art.-Nr. 160205301

### PAX Vakuummatratze AR 1

Die besondere Herausforderung bei der Entwicklung dieser Vakuummatratze lag in der deutlich sichtbaren Kundenkennzeichnung und dem max. Gewicht des Produktes. Die desinfektionsmittelbeständige Beschriftung in Form einer speziellen Folie, die wir mittels eines eigens angefertigten Werkzeugs im Hochfrequenzschweißverfahren untrennbar auf der Matratzeninnenseite aufbringen, war nur eine der Herausforderungen. Dank spezieller Materialien gelang es uns, das Gesamtgewicht der Matratze zu reduzieren. Der Kunde verwendet diese Matratze im Rettungssack, auf der Hubschraubertrage und zum Transport.

92x210 5,45

1x 16x90x97 2x 20x90x60



CE MD

01  
FT  
PRO

### Besondere Ausführung der Kennzeichnung

Mittels eines Spezialwerkzeugs können einfarbige Logos und / oder Schriftzüge auf der Vakuummatratze abgebildet werden.



Im Hochfrequenzverfahren wird das Logo untrennbar und desinfektionsmittelbeständig mit einer speziellen Folie auf der Matratze fixiert. Dieses Verfahren zeichnet die besondere Haltbarkeit aus.



QR Code scannen und Online Sonderanfertigungsanfrage starten:





**PAX RTS - 4 Seasons**

Dank der einknöpfbaren Isolationsdecke kannst du den PAX RTS – 4 Seasons in allen Jahreszeiten nutzen. Mit dem Schnürrsystem am Kopfende und den Erweiterungsreißverschlüssen über dem Brustbereich kann das System komfortabel an den Patienten angepasst werden. Durch die Verwendung einer Reißverschlussöffnung entfällt beim PAX RTS – 4 Seasons die Verwendung von Klett. Ausgestattet mit Tragegriffen nach EN1865, so dass der Patient auch in unsicherem Gelände sicher transportiert werden kann.

Art.-Nr. 276780801

**PAX RTS - 4 Seasons**

45x206 5,11

Lieferung **INKLUSIVE**  
PAX Rettungssack RTS  
AIR - Wärmendecke

Optional dazu bestellbar:  
PAX Rettungssack  
RTS AIR - Kopfhaube



Am Fußende befindet sich eine Tasche für die Vakuumpumpe.



**PAX RTS - Winter und PAX RTS - Sommer**

Nicht nur im Winter ist der Wärmehalt ein bedeutender Faktor für das Patientenwohl. Unsere Rettungs- und Transportlösungen in der Version Winter und Sommer isolieren den Patienten vor Umwelteinflüssen. Das System ist an den Patienten anpassbar. Die Kopföffnung lässt sich mit wenigen Handgriffen ebenfalls zum Wohlbefinden des Patienten in seiner Größe anpassen. Beide RTS sind mit Tragegriffen nach EN1865 ausgestattet, so dass der Patient auch in unsicherem Gelände sicher transportiert werden kann. Die besonders isolierte Winter-Ausführung hält den Patienten auch bei niedrigeren Temperaturen wohlig warm.

Art.-Nr. 275500404

**PAX RTS - Sommer**

48x206 2,70



Art.-Nr. 275510404

**PAX RTS - Winter**

48x206 3,30




Art.-Nr. 278165201

## PAX Wärmendecke - THX

Kompakte Wärmeversorgung für den präklinischen Einsatz. Die Decke mit 48 × 48 cm liefert bis zu 40 °C über einen gesicherten Edelstahlheizleiter. Robuste, abwischbare Hülle – optimal für den schnellen, mobilen Einsatz.

48x48 0,48

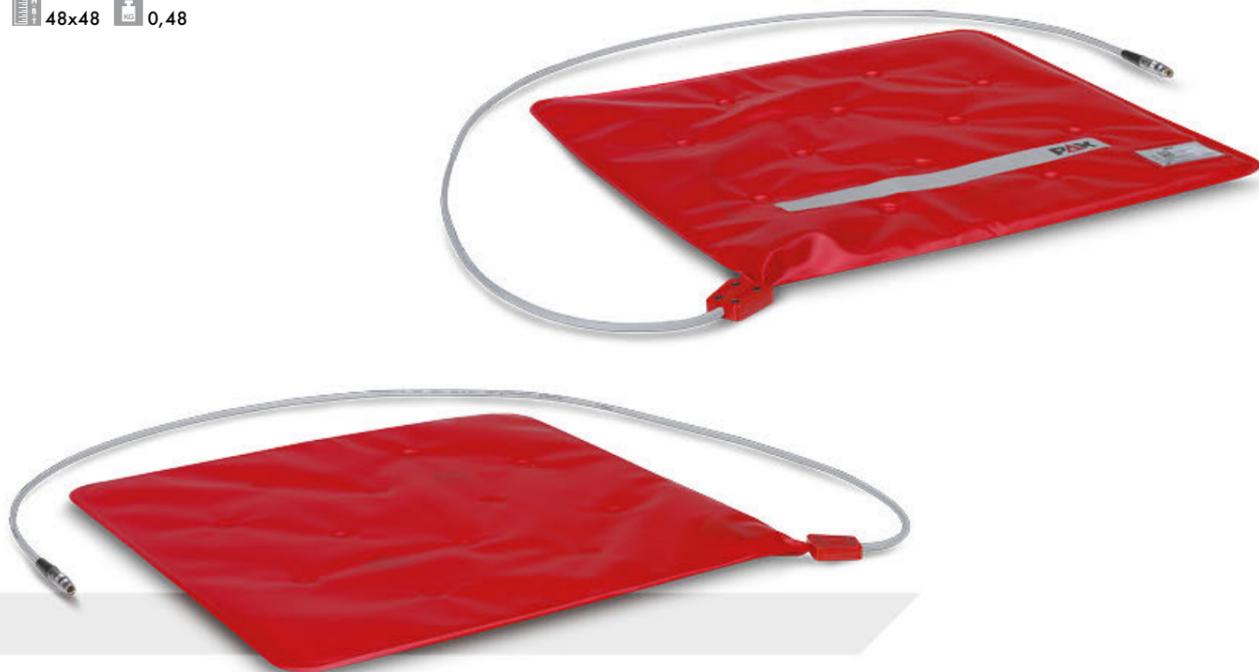

CE MD

01

FT


PRO

Art.-Nr. 284015201

## PAX Wärmendecke - THX 2.0

Aktives Temperaturmanagement System mit Halsausschnitt zur Komfortsteigerung des Patienten.

47,5x56 0,46

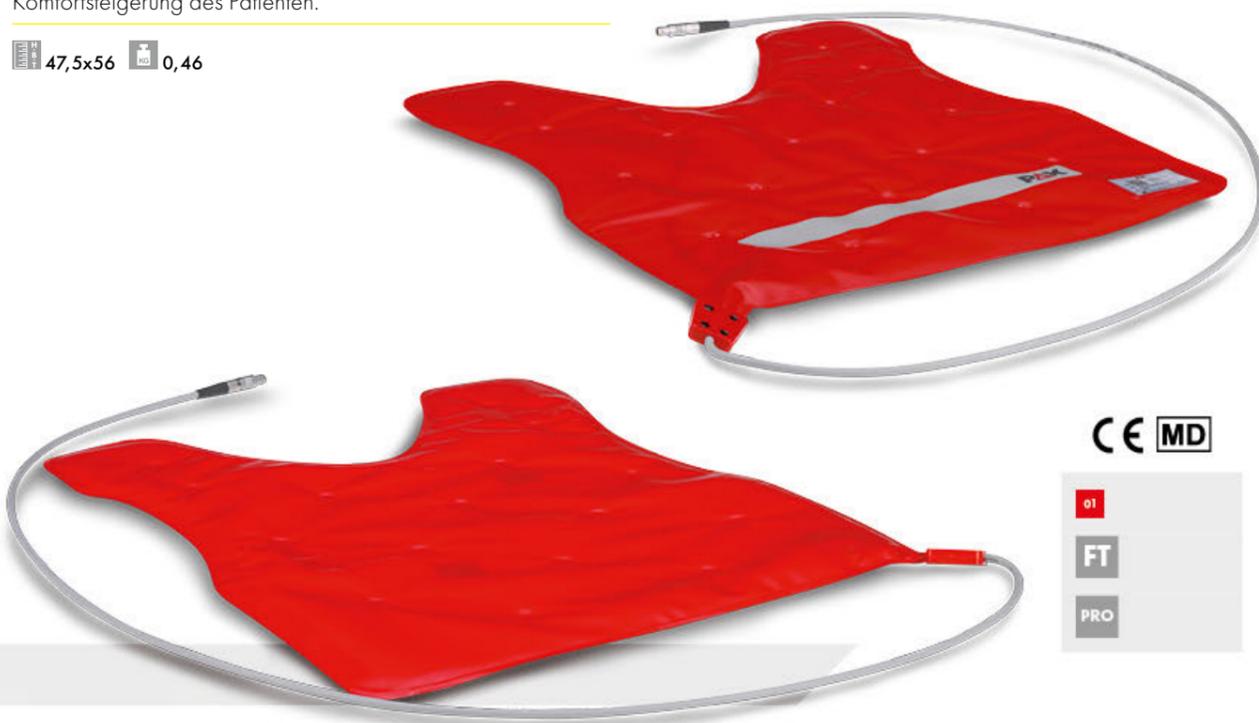

CE MD

01

FT

PRO

Art.-Nr. 284184501

## PAX Transporttasche Wärmendecke THX

Optimal auf die PAX-Wärmendecke inkl. PAX Power-Pack und Ladegerät angepasste Transporttasche in kleinstem Packmaß.

12,5x31x22,5 0,35



01

RIP

PRO

Art.-Nr. 283160000

## PAX Power Pack 60/2

Der PAX Power Pack 60/2 wird inklusive Netzteil ausgeliefert und ist der Akku für die PAX Wärmendecken THX.

5,2x16,5x12 1,58



CE MD

01

PRO

Art.-Nr. 285480301

## PAX Schutztasche Power Pack 60/2

Gepolsterte Schutztasche für den PAX Power Pack 60/2. Durch die Metallschnalle lässt sich der PAX Power Pack 60/2 in der Schutztasche einfach an einem Holm oder Trage für den Transport befestigen.

6x16,5x13,5 0,14



## Die leichte Art des Patiententransports

### PAX Roll-Up Stretcher LAS


Der PAX Roll-Up Stretcher London Ambulance Service dient zum Liegendtransport eines Patienten.

Mit dem klein verpackbaren PAX Roll-Up Stretcher London Ambulance Service kann der Patient durch das Rettungspersonal komfortabel getragen werden.

Art.-Nr. 268935803

### PAX Roll-Up Stretcher LAS

80x200 4,80

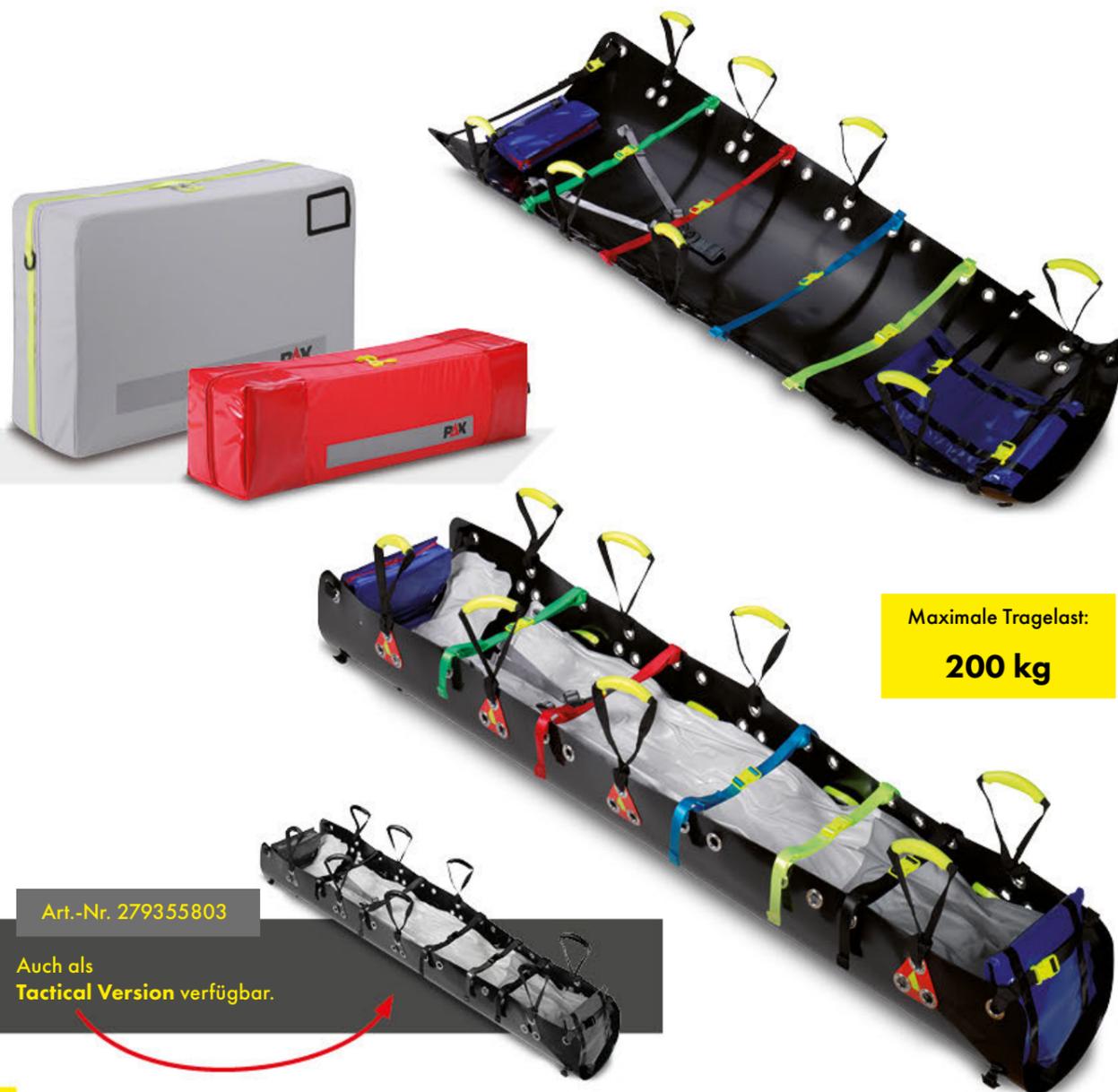

Maximale Tragelast:  
**200 kg**

CE MD

03  
HD  
PE  
PRO



Art.-Nr. 268905310

### PAX Vakuumauflage - Roll-up Stretcher LAS

Die PAX Vakuumauflage - Roll-up Stretcher LAS als Lagerungshilfe für den London Ambulance Stretcher verfügt über eine angepasste Form, angeschweißte, eingerückte Handgriffe sowie einen Schultergurtausschnitt. Sie weist eine geringe Füllung auf, da sie lediglich als Lagerungshilfe dient.

69x195 2,60

1x 11x60x65 2x 15x60x63

CE MD

10  
FT  
PRO





Art.-Nr. 270134510

### PAX Transporttasche für LAS Vakuumauflage

39x59x21 0,30



QR Code scannen und  
**Film zum**  
**PAX Roll-Up Stretcher LAS**  
schauen:

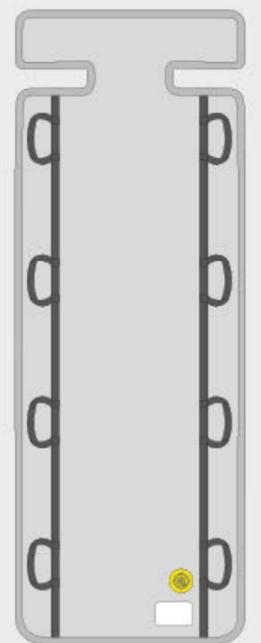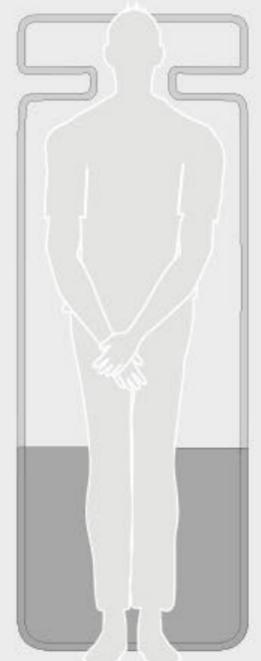

Art.-Nr. 279366010

## PAX Roll-Up Stretcher

Die kompakte und robuste Tragehilfe für herausfordernde Einsätze: Der PAX Roll-Up Stretcher wurde speziell für den schnellen und sicheren Transport von Verletzten aus beengten oder schwer zugänglichen Bereichen entwickelt. Ideal für Rettungsdienste, Polizei, Militär und Katastrophenschutz eignet sich diese temporäre Trage besonders dort, wo der Einsatz einer Standard-Patiententrage nicht möglich ist.

92x210 7,30

CE MD

TO

LD  
PE

PRO



## PAX Tragetuch light

Mit nur 250 g ist das PAX Tragetuch light extrem leicht und einfach zu transportieren. Das Tuch verfügt über sechs verstärkte Tragegriffe und ist bis zu 150 kg belastbar.

105x190 0,25

CE MD

01

03

RIP  
STOP

PRO



Art.-Nr.278896201  
PAX Tragetuch light - EMS

Art.-Nr.277566203  
PAX Tragetuch light - tactical



Art.-Nr. 282846203

### PAX Tragetuch 10H light – tactical

Das PAX Tragetuch 10H light – tactical verfügt über 10 Handschlaufen, jeweils 4 Stück je Längsseite und jeweils 1 Handschlaufe an Kopf- und Fußende. Der Transportbeutel des PAX Tragetuch 10H light – tactical ist aus dem gleichen Material wie das Tragetuch und verfügt über einen Verschluss aus Kordel mit Stopper zum einfachen Öffnen und Schliessen.

80x195 0,30



CE MD

03  
RIP  
STOP  
PRO

Art.-Nr. 288096203

### PAX RTS Cocoon - tactical - light

Der PAX RTS Cocoon - tactical - light überzeugt durch hohe Funktionalität und Praxistauglichkeit. Acht stabile Tragegriffe ermöglichen sicheren Patiententransport. Eine aluminiumbedampfte Innenfläche sorgt für Isolation, während ein integriertes Saugvlies Flüssigkeiten aufnimmt. Die vollständig schließbare Abdeckung mit integrierter Kapuze schützt den Patienten und erlaubt dank seitlicher Zugänge eine schnelle medizinische Versorgung.

205x57 1,27



CE MD

03  
L  
PRO

Art.-Nr. 284430403

### PAX RTS Cocoon - tactical

Der PAX RTS Cocoon – tactical ist für eine effiziente Versorgung und Transport von traumatisierten Patienten in zeitkritischen Situationen konzipiert. Das innovative MEDEVAC Rettungs- und Transportsystem bietet umfassenden Schutz und die Möglichkeit die verletzte Person schnell und effektiv aus dem Gefahrenbereich zu evakuieren.

200x80x2 3,64



CE MD

03  
L  
PRO

Art.-Nr. 104490201

### PAX Tragetuch einfach

Kostengünstiges, einfaches Tragetuch zur Mehrfachnutzung, Ausführung gemäß EN 1865.

85x198 1,70



01  
P  
PRO SEG

Art.-Nr. 102260201

### PAX Tragetuch mit Durchrutschsicherung L

Mehrfachtragetuch nach EN 1865 mit Durchrutschsicherung.

81x198 2,20



01  
P  
PRO SEG

Art.-Nr. 102270201

### PAX Tragetuch XL

Mehrfachtragetuch nach EN 1865. XL-Großes Trage- und Bergetuch mit 14 Griffen, ohne Fußsack inkl. Transporttasche. Zugelassenes max. Gewicht: 250 kg

120x200 3,94



CE MD

01  
P  
PRO SEG

Art.-Nr. 101820201

### PAX Tragetuch XXL 400 kg

Die Rettung von schwergewichtigen Patienten stellt eine besondere Anforderung dar. Dieses Tragetuch mit extra breiten Schlaufen für das Zupacken mit beiden Händen, einer großen Anzahl an Trageschlaufen für viele Helfer und sogar noch zusätzlichen Handgriffreihen für doch nicht ganz so voluminöse Patienten nimmt diese Herausforderung an. Eine zusätzliche Patientensicherung als Y-Sicherheitsgurt mit Brust- und Schrittpolster gegen Einschneiden vervollständigt das Paket, das mit bis zu 400 kg belastet werden kann. Auslieferung inkl. Transporttasche.


160x240 6,60



01  
P  
PRO SEG



Maximale Tragelast:  
**400 kg**

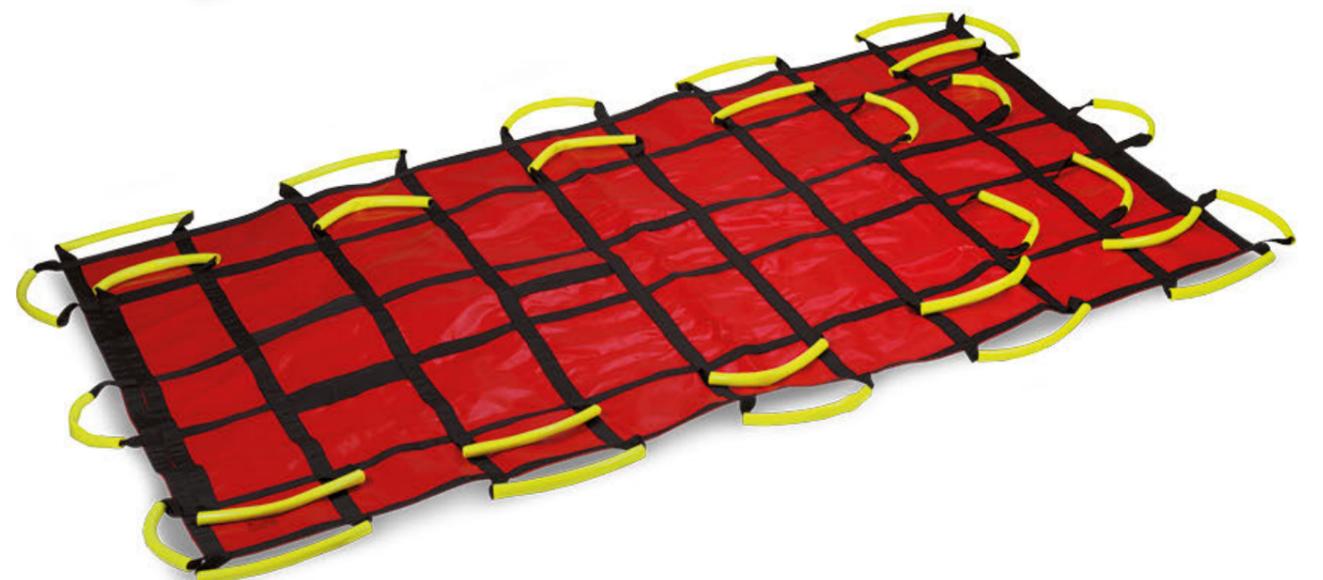

## Kompatibel für alle Absaugsysteme

Das PAX Ventil wird in zwei Ausführungen geliefert. Bei der Variante zur Nutzung des Ventils mit einem Fingertip: Bei diesem Ventil ist ein Stück Schlauch befestigt, dessen Innendurchmesser die Verwendung von Standard Fingertips ermöglicht. Variante zur Nutzung des Ventils mit der PAX Vakuumpumpe: Diese Variante ermöglicht das direkte Einstecken des Schlauchs der PAX Vakuumpumpe ohne zusätzlichen Adapter.



## Luft raus – ohne Anstrengung

Die PAX Vakuumpumpen sind aus hochwertigen und robusten Materialien gefertigt. Durch die guten Gleiteigenschaften des Kolbens in dem Aluminiumzylinder und den kurzen Hubweg ermöglichen die PAX Vakuumpumpen ein schnelles und effektives Absaugen deiner PAX Vakuumprodukte. Die PAX Vakuumpumpe ist in zwei Versionen erhältlich.

**PAX Vakuumpumpe - Hand:** Für die Nutzung der kleinen und leicht zu verstauenden Vakuumpumpe werden beide Hände benötigt.

**PAX Vakuumpumpe - Fuß:** Bei dieser Pumpe ist zusätzlich ein Fußbügel aus robustem Edelstahl angebracht. Dieser ermöglicht ein effektives Absaugen mit nur einer Hand.



## Wenn die Luft mal raus ist...

### ...dann soll sie auch draußen bleiben.

Passiert bei einem Einsatz doch mal ein Malheur und die PAX Vakuumprodukte ziehen Luft, dann ist das kein unlösbares Problem. Denn unser selbstklebender, transparenter und einfach zu benutzender PAX Reparaturaufkleber ist in sekunden-schnelle an der Leckage angebracht und dein PAX Vakuumprodukt funktioniert sofort wieder wie gewohnt.



## PAX Vakuum Ersatzteile

### Viel drum herum

Zu den PAX Vakuumprodukten erhältst du jede Menge Zubehör, welches passend auf das gesamte System abgestimmt ist. Mit seinen systemübergreifenden Gurtverschlüssen, Gurtverlängerungen, Spezial-

Schlauchverbindungen, Tragegriffen, Reparaturaufklebern, Transporttaschen und der hocheffizienten PAX Vakuumpumpe lässt das System kaum Wünsche offen.



## Wartung und Reparatur

Die PAX Vakuumprodukte (auch Pumpen) sollten regelmäßig, am besten nach jedem Einsatz, auf Beschädigungen, Undichtigkeit und richtige Funktionsweise überprüft werden. Bei festgestellten Beschädigungen an Fixiergurten und /oder Handgriffen sollten diese sofort ausgewechselt werden.

Art.-Nr. 157510000

### PAX Reparaturaufkleber Vakuum

Selbstklebender PAX Reparaturaufkleber zur einfachen Reparatur kleinerer Beschädigungen an einem PAX Vakuumprodukt. Für Reparaturen von Patientenseite als auch der Unterseite unserer PAX Vakuumprodukte geeignet.

10x7,5



Art.-Nr. 156990008

### PAX Vakuummatratzen Griffset (10er)

Set bestehend aus 10 Einzelgriffen. Ersatzgriffe zur einfachen Montage an PAX Vakuummatratzen. Bewährter und ergonomischer PAX Handgriff.



Art.-Nr. 162420008

### PAX Vakuummatratzen Griffset (2er)

Ersatzgriffe zur einfachen Montage an PAX Vakuummatratzen. Bewährter und ergonomischer PAX Handgriff. Set bestehend aus 2 Griffen.



### PAX Vakuumventil

mit PAX Sicherungsschlaufe



### PAX Vakuumventil

mit PAX Sicherungsschlaufe direkt am Produkt



Art.-Nr. 26868

### PAX Ersatzteil Vakuum - Schraub - Ventil Matratze und Schiene

Ersatzartikel PAX Vakuumventil für PAX Vakuummatratze und PAX Vakuumschiene.

0,44x0,26 0,07



Art.-Nr. 268790303

### PAX Sicherungsschlaufe Vakuumventil

PAX Sicherungsschlaufe zum Befestigen des PAX Vakuum-Schraub-Ventils-Matratze und -Schiene an den PAX Vakuumprodukten. Erhältlich im 10er Set.

5,2x11,4 0,01



Art.-Nr. 274270000

### PAX Vakuum Ventil mit Adapter für Fingertip

Bestehend aus Ventil für PAX Vakuumprodukte mit eingeklebtem PVC-Schlauch zum Anbringen eines Fingertips. Auslieferung ohne Sicherungsschlaufe und Fingertip.

0,03





Art.-Nr. 273130003

## PAX Vakuumpumpe - Fuß

Mit der PAX Vakuumpumpe - Fuß kannst Du die PAX Vakuumprodukte auch mit einhändiger Bedienung im Handumdrehen passgenau am Patienten fixieren.

10x51,7x5,9 1,13




Art.-Nr. 270890003

## PAX Vakuumpumpe - Hand

Mit Hilfe der PAX Vakuumpumpe- Hand sind unsere PAX Vakuumprodukte im Handumdrehen passgenau um den Patienten modelliert. Hier die Ausführung für die Handabsaugung.

10x30,7x5,9 0,70

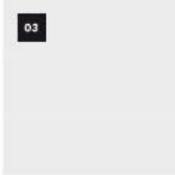

Finde weitere Informationen auf unserer Internetseite sowie aktuelle Produkte, Neuheiten im Shop und Wissenswertes im Downloadbereich. Lass Dich inspirieren.

Du hast trotzdem noch Fragen? Telefonisch ist unser Kundenservice für dich da oder vereinbare einen Vor-Ort-Termin mit unseren Beratern. Wir sind für dich da – dein zuverlässiger Partner im Alltag und Einsatz.

Art.-Nr. 257490401

## PAX Transporttasche Vakuumschienen

Das gesamte PAX Vakuumschienen Set findet in dieser passenden Transport- und Lagerungstasche Platz und lässt sich somit bequem transportieren.

35x50x14 0,45



Art.-Nr. 257470401

## PAX Transporttasche Vakuummatratze

Für die PAX Vakuummatratzen bieten wir dir natürlich auch die passenden Transport- und Lagerungstaschen an. Hier finden sie ausreichend Platz und lassen sich bequem transportieren.

71x77x14 0,65





Die PAX Fixiergurte der Vakuummatratzen und der Bein- und Armschienen werden mittels längenvariabler Gurte und Steckschnallen am Patienten fixiert und in Form gehalten. Die abnehmbaren Gurte können einfach gereinigt und desinfiziert oder ausgetauscht werden.

Art.-Nr. 157004200

### PAX Fixiergurt Set Vakuummatratzen

Fixiergurte zur einfachen und schnellen Montage an den PAX Vakuummatratzen und einfachen Fixierung der Patienten. Eindeutiger Farbcode zur schnellen Zuordnung auch in schwierigen Situation oder schlechten Lichtverhältnissen. Farblich gekennzeichnete Steckschnalle in tagesleuchtgelb.

4,5 1,40



CE MD

Wabbing



Art.-Nr.	Art.-Name	Farbe	Länge (cm)
277554210	PAX Fixiergurt Verlängerung Grau - Vakuummatratze	■	111
277544203	PAX Fixiergurt Schwarz - Vakuummatratze	■	147
277534232	PAX Fixiergurt Blau - Vakuummatratze	■	167
277524204	PAX Fixiergurt Gelb - Vakuummatratze	■	187
277514201	PAX Fixiergurt Rot - Vakuummatratze	■	187
277504211	PAX Fixiergurt Grün - Vakuummatratze	■	177

Art.-Nr. 283643000

### PAX Fixiergurt Set - Vakuummatratzen TPU

Unsere neue Generation Fixiergurte aus 40mm breitem TPU beschichtetem Gurtband zur einfachen Reinigung mit verbesserten Steckschnallen


4 0,79



CE MD

TPU

Art.-Nr.	Art.-Name	Farbe	Länge (cm)
277553010	PAX Fixiergurt Verlängerung Grau - Vakuummatratze TPU	■	111
277543003	PAX Fixiergurt Schwarz - Vakuummatratze TPU	■	147
277533032	PAX Fixiergurt Blau - Vakuummatratze TPU	■	167
277523004	PAX Fixiergurt Gelb - Vakuummatratze TPU	■	187
277513001	PAX Fixiergurt Rot - Vakuummatratze TPU	■	187
277503011	PAX Fixiergurt Grün - Vakuummatratze TPU	■	177

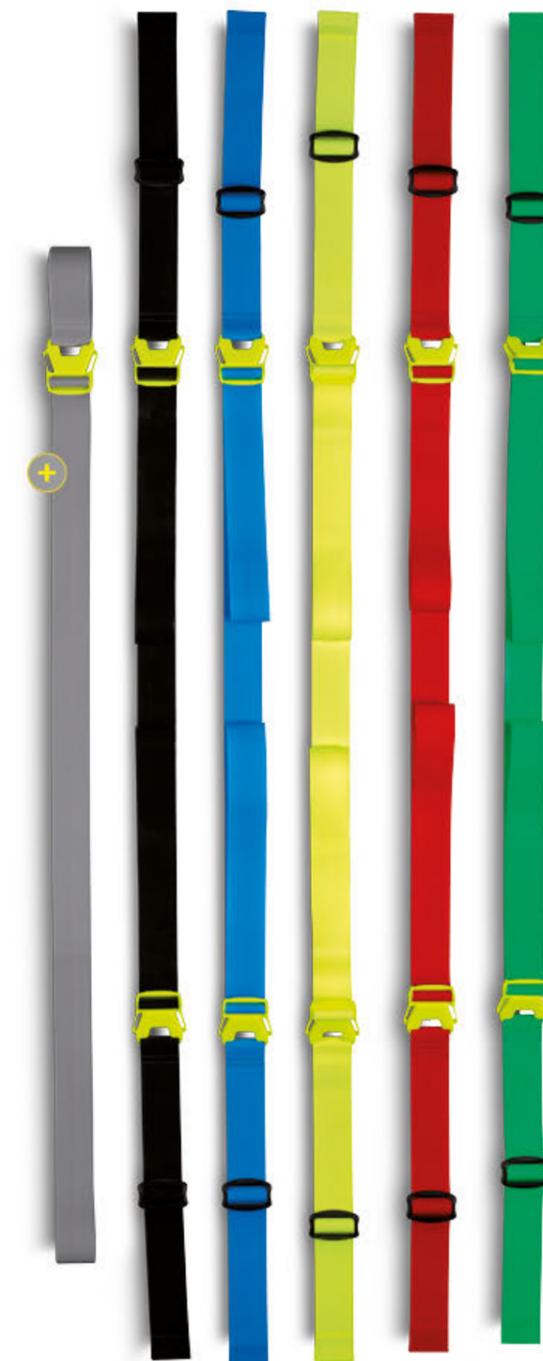

Im Lieferumfang enthalten: Dieser Gurt ist die individuell nutzbare universelle Gurtverlängerung.

Art.-Nr. 160881508

## PAX Kopffixierung Set - Vakuummatratze

Die PAX Ersatzklettstreifen der PAX Kopffixierung für PAX Vakuummatratze bestehend aus: 1x 25er Flauschstreifen tagesleuchtgelb, Länge 50 cm, 1x 50er Flauschstreifen tagesleuchtgelb, Länge 50 cm, mit ovalem Ausschnitt mittig, (2 x 12,5 cm). Erhältlich im Zubehör.

0,02



Auch als 10er Set im Zubehör erhältlich:  
Art.-Nr. 274981508  
PAX Kopffixierung Set - Vakuummatratze



CE MD

08

Wabbing

Art.-Nr. 164244203

## PAX Adapter-T-Stück-für-Kopffixierung

PAX Adapter-T-Stück für die Montage der Kopffixierung an der PAX Vakuummatratze. Gefertigt aus 50mm Gurmband mit Hakenband als T-Stück. 1 Set besteht aus jeweils 2 einzelnen T-Stücken.

0,35



03

Wabbing



Art.-Nr. 274731110

## PAX Fixiergurt Set - Vakuumschiene Ellenbogen

Dieses Ersatzgurteset besteht aus:


- 2 x 50 cm Fixiergurt mit Steckschnalle und PAX-Flex Tec 3 mm T-Befestigungsstück
- 2 x 75 cm Fixiergurt mit Steckschnalle und PAX-Flex Tec 3 mm H-Befestigungsstück

Art.-Nr. 274741110

## PAX Fixiergurt Set - Vakuumschiene Unterarm

Dieses Ersatzgurteset besteht aus:

- 3 x 75 cm Fixiergurt mit Steckschnalle und PAX-Flex Tec 3 mm H-Befestigungsstück

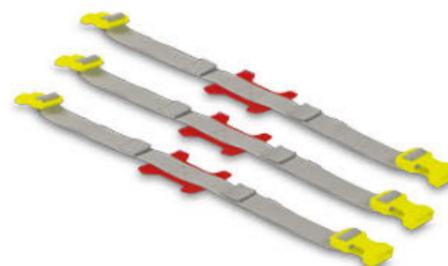

Art.-Nr. 165121110

## PAX Fixiergurt Set - Vakuumschiene rec


Dieses Ersatzgurteset besteht aus:

- 3 x 110 cm Fixiergurt mit Steckschnalle und 2 Leiterschnallen zur Befestigung
- 2 x 140 cm Fixiergurt mit Steckschnalle und 2 Leiterschnallen zur Befestigung



CE MD

Wabbing

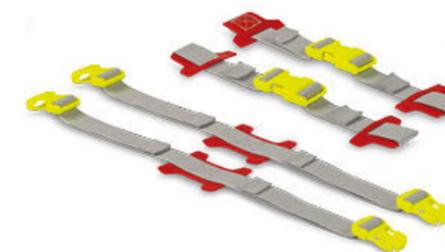


Art.-Nr. 274751110

## PAX Fixiergurt Set - Vakuumschiene Bein

Dieses Ersatzgurteset besteht aus:

- 3 x 75 cm Fixiergurt mit Steckschnalle und PAX-Flex Tec 3 mm T-Befestigungsstück
- 1 x 50 cm Fixiergurt mit Steckschnalle und PAX-Flex Tec 3 mm T-Befestigungsstück

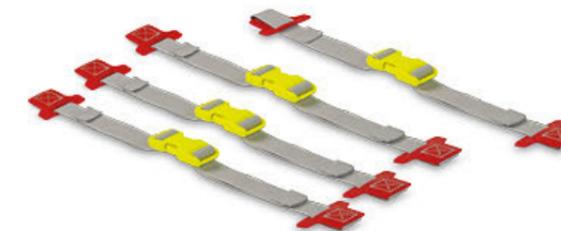

In dieser Broschüre findest du eine Auswahl unseres Sortiments. Die angegebene Artikelnummer wird durch deine Material- und Farbauswahl ergänzt. Natürlich kannst du diese Auswahl auch in unserem Onlineshop unter [www.pax-bags.com](http://www.pax-bags.com) treffen.

## Allgemeine Symbole



Maße in Zentimetern, angegeben in Höhe x Breite x Tiefe



Mindest Leergewicht in kg. Gewicht variiert je nach Material



Angabe Falmaß beim einfachen Übereinanderlegen



Angabe Falmaß beim zweifachen Übereinanderlegen



Produkt ist besonders für den täglichen Einsatz konzipiert



Produkt ist besonders geeignet für den Einsatz von Schnelleinsatzgruppen



Produkt wird mit Transporttasche ausgeliefert



Individuelle Kennzeichnung am Produkt möglich



Made in Germany

## Farben:



rot



schwarz



tagesleuchtgelb



grau



Produkt ist konform mit den anwendbaren EU Richtlinien



Produkt ist ein Medizinprodukt und konform mit der EU Richtlinie 2017/745 - MDR

## Materialien für dauerhafte Funktionalität



### FT PAX-Flex Tec MP

In alle Richtungen dehnbares Folienmaterial mit angenehm weicher Haptik, wodurch es sich bei niedrigen und hohen Temperaturen gut anmodellieren lässt. Desinfizierbar und biokompatibel, nicht zelltoxisch nach DIN EN ISO 10993-5.



### L PAX-Light

Diese Materialqualität wird für leichte Produkte und im Innenbereich eingesetzt. Widerstandsfähig, wasserdicht und desinfizierbar. Flächengewicht zwischen 150 und 200 g/m<sup>2</sup>.




### TEC MP PAX-Tec Plus MP

Sehr robustes PES-Gewebe mit beidseitiger Folienkaschierung. Die äußere Seite ist zur Erhöhung der Abriebfestigkeit stärker beschichtet. Gut desinfizierbar und biokompatibel, nicht zelltoxisch nach DIN EN ISO 10993-5.

## PAX Reinigungsservice

Du möchtest, dass wir dein PAX Produkt waschen und desinfizieren?

Für Organisationen und Firmen bieten wir den PAX Reinigungsservice an. Ihr könnt uns auch eure Rucksäcke und Taschen zur Reinigung schicken. Für die Dauer der Reinigung bieten wir entsprechende Leihprodukte an. Mehr darüber auf unserer Homepage: [www.pax-bags.com/go/waschservice](http://www.pax-bags.com/go/waschservice)

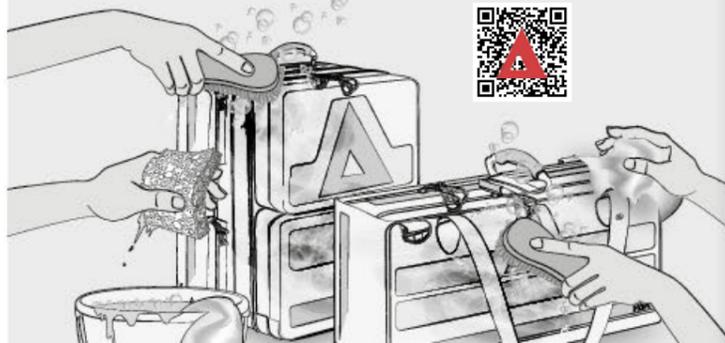

QR Code scannen und weitere Informationen zu den PAX Materialien ansehen:



## PAX Qualität

### Entwicklung

Wir haben unser eigenes Entwicklerteam, das mit den zahllosen Entwicklern in unserem Kundenkreis erfolgreich zusammenarbeitet. Uns alle eint der Wunsch ein PAX Produkt bestmöglich für seinen Einsatzzweck zu entwickeln.

### Manufaktur

In unserer Manufaktur setzen wir Einzelstücke - also auch die ganz individuellen Kundenwünsche - um und prüfen unsere Ideen auf Umsetzbarkeit.

### Kleinserienfertigung

In unserer Fertigung in Polen arbeiten unsere Kollegen seit vielen Jahren mit uns zusammen und bringen die bewährte PAX Qualität in die PAX Produkte.

### Großserienfertigung

Für die Serienfertigung arbeiten wir seit mehr als 15 Jahren mit unserem Partner in Vietnam zusammen. Dort wird die PAX Qualität sehr ernst genommen und viel Liebe zum Detail ins PAX Produkt gebracht.

## Garantie

Wenn du deine PAX Produkte zur verlängerten Garantie angemeldet hast, kannst du den Vorteil der Registrierung für die Bestimmung deines Produktes nutzen und erhältst die Produktdaten aus unserem System.

Gib hierfür einfach die Seriennummer ein, die sich an deinem PAX Produkt befindet. Solltest du dich zu einer für dich kostenlosen Garantieverlängerung angemeldet haben (siehe hierzu die gesonderten Regelungen unter [www.pax-bags.com](http://www.pax-bags.com)), erhältst du auf alle Leistungen, die sich auf registrierte Produkte im Rahmen der Reparatur beziehen, einen attraktiven Treuebonus von 10% auf die im Rahmen der Reparatur von uns zu erbringenden Leistungen. Für die Zeit der Reparatur stellen wir dir gerne auf Wunsch ein Ersatzprodukt zur Verfügung, damit du im Alltag auf Nichts verzichten musst. Die Anforderung dieses Ersatzproduktes muss im Rahmen der Reparaturanmeldung angegeben werden. Wir werden uns dann mit dir in Verbindung setzen.




## PAX Seriennummer

Die für die Registrierung notwendige Seriennummer findest du bei vielen unserer Produkte am Handgriff oder gut sichtbar im Produkt.





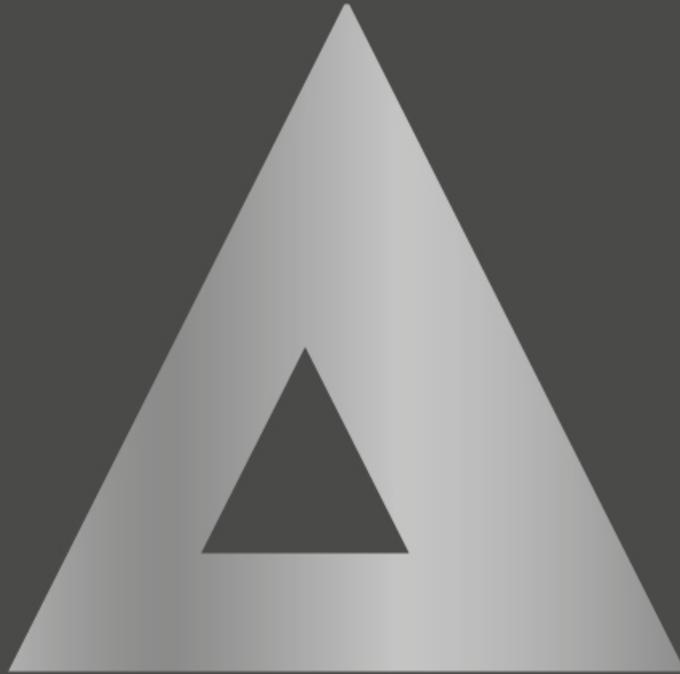

X-CEN-TEK GmbH & Co. KG • Westerburger Weg 30 • 26203 Wardenburg  
Tel.: +49 (0)44 07 - 7 14 76 - 0 • E-Mail: [info@pax-bags.de](mailto:info@pax-bags.de) • [www.pax-bags.com](http://www.pax-bags.com)

it's all about performance