



# Datenblatt PAX RTS Cocoon - light - tactical


Art. Nr.: 288096944

## PAX RTS Cocoon - light - tactical

- ▲ CASEVAC Rettungs- und Transportsystem mit integrierter Wundauflage
- ▲ Schutz vor Hypothermie durch Reflektion der Körperwärme mittels PAX-Rip Tec Alu
- ▲ Innenseite mit aluderm® Wundauflage und hochaktiver Saugschicht ausgestattet
- ▲ Verfügt über 8 Handgriffe für die schonende Evakuierung
- ▲ Vakuumiert auf nur 3 cm Stärke für platzsparende Lagerung

### Technische Daten:

- ▲ Belastbarkeit: 250 kg
- ▲ Verfügt über 8 Handgriffe für die schonende Evakuierung
- ▲ Flüssigkeitsaufnahme: 1,50 Liter

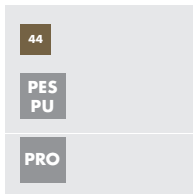

(BxL): 210 x 80 cm (geöffnet)

(BxL): 27 x 30 x 3 cm (verpackt)

0,85 kg




### Innovation durch PAX-Rip Tec Alu und aluderm®

Die Kombination aus PAX-Rip Tec Alu und aluderm® sorgt für effektiven Wärmeerhalt durch Reflexion der Körperwärme. Ein integriertes Vlies mit einer Aufnahmekapazität von bis zu 1,50 Litern Flüssigkeit bindet Blut und andere Körperflüssigkeiten zuverlässig, ohne diese an den Verwundeten zurückzugeben. Dadurch werden Hygiene, Patientenschutz und Einsatzsicherheit deutlich verbessert.



### Dokumentation jederzeit im Blick

Ein gut sichtbarer Klarsichteinschub ermöglicht die sichere Unterbringung der Verwundetendokumentation. So bleiben alle relevanten Informationen direkt am Patienten verfügbar und können während des gesamten Einsatzes schnell und eindeutig abgelesen werden.

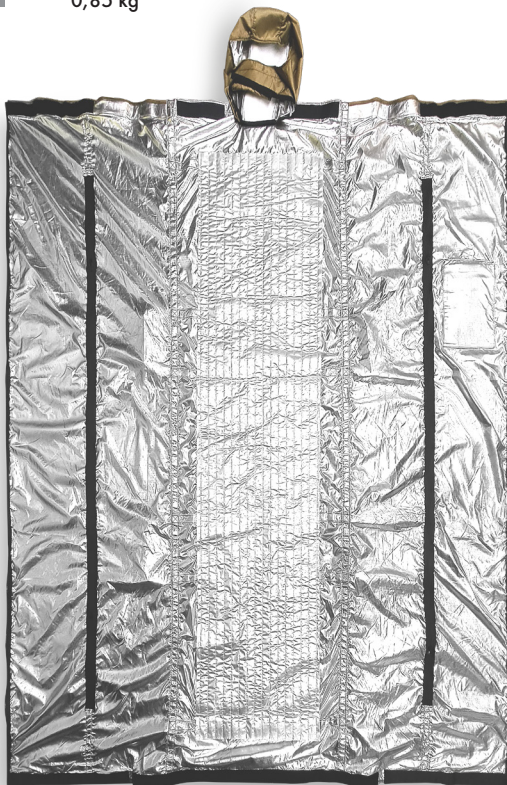

**Hersteller:**  
X-CEN-TEK GmbH & Co. KG  
Westerburger Weg 30  
26203 Wardenburg / Germany

Tel.: +49 (0) 44 07 - 7 14 76 0  
Fax: +49 (0) 44 07 - 7 14 76 99  
Email: info@pax-bags.de  
Internet: www.pax-bags.com

**Stand:**  
November 2025



# Datenblatt PAX RTS Cocoon - light - tactical

Art. Nr.: 288096944

## PAX RTS Cocoon - light - tactical

### Kompakte Lagerung und Transport

Im vakuumierten Zustand reduziert sich die Materialstärke auf nur 3 cm.

Dadurch lässt sich der PAX RTS Cocoon - light - tactical besonders platzsparend verstauen und effizient in gängigen Rucksacksystemen transportieren.



### Sicherer Verwundetentransport

Der PAX RTS Cocoon - light - tactical verfügt über je vier Hangriffe an den Längsseiten, so kann die verwundete Person zügig und sicher evakuiert werden. Als Medizinprodukt ist das Rettungs- und Transportsystem nach den anwendbaren Anforderungen der DIN EN 1865 geprüft.

### Optimierter Kopfschutz

Die abnehmbare Kapuze aus aluminiumbeschichtetem Material ist integriert und verstärkt den Schutz vor Wärmeverlust.



### Zugang zum Verwundeten von allen Seiten

Beidseitige Zugänge mit jeweils vier Reißverschlusschiebern ermöglichen jederzeit die gezielte Sichtung und Behandlung von Verletzungen sowie die Ableitung von Vitalparametern – ohne unnötige Belastung des Verwundeten.

Der Cocoon lässt sich bei Bedarf vollständig öffnen, um eine schnelle und effektive medizinische Behandlung sicherzustellen.

Eine Umlagerung ist nicht erforderlich - der Verwundete verbleibt vom POI bis zur definitiven Versorgung im PAX RTS Cocoon - light - tactical.



**Hersteller:**  
X-CEN-TEK GmbH & Co. KG  
Westerburger Weg 30  
26203 Wardenburg / Germany

Tel.: +49 (0) 44 07 - 7 14 76 0  
Fax: +49 (0) 44 07 - 7 14 76 99  
Email: info@pax-bags.de  
Internet: www.pax-bags.com

**Stand:**  
November 2025